



**HAIRMAX<sup>®</sup>**  
The science of hair growth.<sup>®</sup>

HairMax LaserComb<sup>®</sup>

Ultima 9 Classic  
& Ultima 12 Classic

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

## Čo by ste mali vedieť skôr, než začnete?

Úvod . . . . .	1
Pre koho je určený? (Klasifikácia muž/žena) . . . . .	2
Pre aký typ pleti je určený ? (Fitzpatrick Typ pleti) . . . . .	3
Upozornenia a varovania . . . . .	4
Riziká/Symboly/Testovanie citlivosti . . . . .	5
Ako monitorovať aktivitu zariadenia . . . . .	6
Režim zlyhania zariadenia . . . . .	6
Životnosť zariadenia . . . . .	6
Súhrn klinickej štúdie u mužov . . . . .	7
Súhrn klinickej štúdie u žien . . . . .	8

## HairMax LaserComb Ultima 9 & Ultima 12

Prehľad zariadenia . . . . .	9
Začíname . . . . .	10
Možnosti nabíjania . . . . .	10
Správne použitie . . . . .	11
Manipulácia so zariadením . . . . .	11
Obsah balenia . . . . .	13
Riešenie problémov . . . . .	14

## Ďalšie užitočné informácie

Bezpečnostný štítok . . . . .	15
Laserové parametre . . . . .	15
Podmienky použitia . . . . .	15

Špecifikácie napájacieho zdroja . . . . .	15
Pokyny na údržbu/čistenie . . . . .	16
Elektrická bezpečnosť . . . . .	17
Pokyny pre elektromagnetické emisie . . . . .	18
Elektromagnetická imunita . . . . .	19
Odporúčania týkajúce sa elektromagnetickej vzdialenosti . . . . .	21
Záruka . . . . .	22

## Corporate Office – Customer Service – Warranty Repairs

Lexington Intl., LLC  
1040 Holland Drive  
Boca Raton, Florida 33487 USA  
Email: [info@hairmax.com](mailto:info@hairmax.com)  
[www.HairMax.com](http://www.HairMax.com)

Direct line +1 561-417-0200

United States and Canada 1-866-527-3726

United Kingdom 0808-134-9868 Australia

1-800-937-358

Monday - Friday 9 AM - 5 PM ET

Pre viac informácií o používaní, kvalite a bezpečnosti  
nájde na stránke:

[www.hairmax.com/videos](http://www.hairmax.com/videos) and [Hairmax.com/QualitySafety](http://Hairmax.com/QualitySafety)

## Predstavenie HairMax®

Váš HairMax je domáce laserové zariadenie, ktoré je klinicky overené na liečbu dedičného vypadávania vlasov u mužov a žien. HairMax je voľne predajný prístroj, ktorý je možné predat' priamo verejnosti.


## Indikácie

Modely HairMax sú určené na liečbu androgénnej alopecie a na podporu rastu vlasov u žien, ktoré majú Ludwig (Savin) I-4, II-1, II-2 alebo čelné vzorce vypadávania vlasov, a u mužov, ktorí majú Norwood Hamilton Classi fi cations IIa až V a ktorí majú Fitzpatrick typy pleti I až IV.

## Ako HairMax funguje

HairMax funguje tak, že poskytuje laserovú energiu na stimuláciu vlasových folikulov. Pre dosiahnutie optimálnych výsledkov nesmie byť laser blokovaný vlasmi a musí mať prístupnú cestu k pokožke hlavy.

HairMax má zúbky, ktoré rozdeľujú vlasy a umožňujú maximálnemu množstvu laserovej energie preniknúť ku pokožke hlavy.

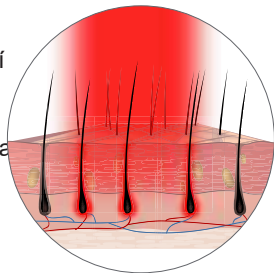

## Ošetrovanie pomocou HairMax

HairMax by sa mal používať 3-krát týždenne s rozstupom každý druhý deň. Napríklad pondelok, streda, piatok. HairMax by sa nemal používať viac, ako je odporúčaná doba liečby denne. Klinické štúdie dokazujú, že používatelia vidia zmeny už za 16 týždňov.

## Výhody HairMax

Klinická štúdia sa uskutočňovala u mužov a žien počas šesťmesačného obdobia. Štúdia ukázala, že u 90% mužov a žien sa zvýšil počet vlasov.

Podrobné výsledky štúdie sú uvedené na stranách 7- 8.

\*Na základe minimálne 5 nových vlasov na centimeter štvorcový/32 nových vlasov na palec štvorcový, ktoré boli pozorované pri následnej návšteve.

Pred použitím prístroja HairMax je dôležité prečítať si tento návod na použitie a porozumieť mu.

# PRE KOHO JE HAIRMAX® URČENÝ?


Ako zistíte, či je HairMax pre vás vhodný?

HairMax môžu používať muži a ženy s rednúcimi vlasmi (vrátane vlasov ošetrovaných farbou) alebo so plešatosťou spôsobenou dedičným stavom. Na opísanie stupňa vypadávania vlasov používajú lekári systém známy ako Norwood Hamiltonova klasifikácia (muži) a Ludwig-Savinova klasifikácia (ženy). Nižšie sú uvedené obrázky jednotlivých škál. Tieňované oblasti zobrazujú typ vypadávania vlasov, ktorý je možné liečiť HairMaxom.

Norwood Hamilton  
klasifikácia - Muži



Ludwig-Savin  
klasifikácia - Ženy

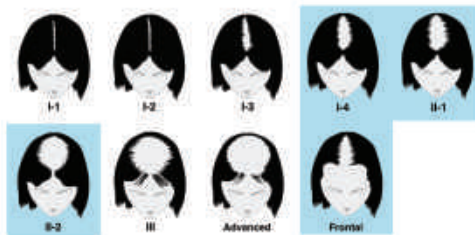

HairMax nebol testovaný na vypadávanie vlasov mimo tieňovaných oblastí

# PRE KOHO JE URČENÝ HAIRMAX®?

HairMax bol študovaný od svetlých až po hnedé tóny pleti (typy 1,2,3,4), ako je opísané v nasledujúcej stupnici Fitzpatrick. Neznamená to, že zariadenie nebude pracovať na najtmavších tónoch pleti. Z dôvodu obmedzení digitálnej fotografie a softvéru na počítania vlasov sa nám to nepodarilo otestovať na tmavých typoch pokožky.

**Sprievodca klasifikáciou typu pokožky Fitzpatrick:** Spôsob, ako opísať typ pleti na základe jej komplexnosti a toho, čo sa s ňou stane pri slnečnom svetle.

Typ 1	Klinicky testované na týchto typoch pleti	Veľmi biela alebo pehavá pokožka, vždy spálená pri slnečnom žiarení (veľmi biela, často sa vyskytuje u ľudí s ryšavými alebo blond vlasmi a modrými očami).
Typ 2		Biela pokožka, zvyčajne spálená pri slnečnom žiarení (biela; často u ľudí s červenými alebo blond vlasmi a modrými, zelenými alebo orieškovými očami).
Typ 3		Biely alebo olivový odtieň pleti, niekedy spálený pri slnečnom žiarení (biela; viditeľný u ľudí s akoukoľvek farbou vlasov alebo očí.)
Typ 4		Hnedá pokožka, popáleniny zriedka pri slnečnom žiarení (bežné u ľudí stredomorského pôvodu)
Typ 5	Klinicky netestované na týchto typoch pleti	Tmavohnedá pokožka, veľmi zriedka popálená slnečným žiarením (bežné u ľudí stredovýchodného pôvodu).
Typ 6		Čierna pokožka, popáleniny zriedka pôsobením slnka

Upravené z Fitzpatrickovej dermatológie vo všeobecnom lekárstve. McGraw-Hill Professional; 5. vydanie.

Upozorňujeme, že HairMax bol testovaný iba na svetlých až hnedých tónoch pleti. To neznamená, že nebude fungovať na tmavších tónoch pleti.

# UPOZORNENIA A VAROVANIA

## UPOZORNENIA

- ⚠ Nedívejte sa priamo na červené laserové svetlo alebo jeho odraz v zrkadle, pretože by to mohlo dočasne podráždiť oči. Ak pozeráte na svetlo príliš dlho, mohlo by to poškodiť vaše oči. Nikdy nepoužívajte zväčšovacie sklo, keď používate HairMax, pretože by to mohlo spôsobiť dočasné podráždenie vašich očí.
- ⚠ Uchovávajte HairMax mimo dosahu detí a domácich miláčikov.
- ⚠ Nepúšťajte HairMax do vody, pretože by ste mohli zasiahnuť elektrický prúd. Ak dôjde k poškodeniu vášho HairMaxu vodou, kontaktujte bezplatný zákaznický servis na nižšie uvedených číslach.
- ⚠ Ak je kábel poškodený na vašom prístroji HairMax, zariadenie nepoužívajte, pretože by mohlo dôjsť k zásahu elektrickým prúdom. Ak sa kábel poškodí, obráťte sa na bezplatné zákaznícke služby na telefónnom čísle uvedenom nižšie.
- ⚠ Nepoužívajte HairMax v blízkosti vyhrievaných povrchov, pretože by to mohlo spôsobiť nefunkčnosť zariadenia a môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom. Bezplatne kontaktujte zákaznický servis na nižšie uvedených číslach
- ⚠ Nevystavujte sa priamemu laserovému svetlu
- ⚠ Toto je neškodné zariadenie citlivé na nízku úroveň ESD (elektrostatický výboj). Nedotýkajte sa nabíjacích kontaktov ani portu USB. (pozri stranu 9). Dotknutie sa kontaktov alebo USB portu nie je zásadným výkonom a nespôsobí základné bezpečnostné problémy. Ak dotyk s kontaktmi alebo portom USB spôsobí poruchu zariadenia, resetujte ho vypnutím a opätovným zapnutím.
- ⚠ Úpravy tohto zariadenia nie sú povolené.
- ⚠ Toto zariadenie nemá žiadne časti opraviteľné používateľom. Nepokúšajte sa toto zariadenie upravovať alebo opravovať.
- ⚠ Pokiaľ je zariadenie v prevádzke, nepokúšajte sa ho upravovať alebo opravovať.
- ⚠ Ak je toto zariadenie upravené, musia sa vykonať príslušné kontroly a skúšky, aby sa zabezpečilo ďalšie bezpečné používanie. Bezplatne kontaktujte zákaznický servis HairMax na nižšie uvedených číslach.

## POZOR

- ⚠ Ak užívate akékoľvek lieky alebo výrobky, ktoré spôsobujú citlivosť na svetlo, mali by ste si HairMax otestovať, aby ste sa uistili, že nemáte žiadnu reakciu. Niektoré z vecí, ktoré môžu spôsobiť zvýšenú citlivosť na váš HairMax, môžu byť lieky na prechladnutie, alergie, lieky proti bolesti a lieky na liečbu infekcií. Ak chcete otestovať citlivosť HairMaxu, zapnite prístroj, držte ho na jednom mieste a sviette svetlom na predlaktie. Po dvoch minútach prístroj vypnite a odložte nabok. Pozerať sa na miesto, kde ste držali laserové svetlo počas nasledujúcich päť minút. Ak spozorujete akúkoľvek reakciu, ako je začervenanie alebo vyrážka, nepoužívajte svoj HairMax a obráťte sa na náš bezplatný zákaznický servis na nižšie uvedených číslach, kde nájdete informácie o tom, ako vrátiť váš produkt a získať vrátenie peňazí.
- ⚠ Používajte svoj HairMax iba podľa pokynov. Nepokúšajte sa meniť spôsob fungovania vášho HairMaxu. Iné úpravy ovládacích prvkov, úprav, výkonu alebo postupov, ako sú tu uvedené, môžu mať za následok vystavenie nebezpečnému žiareniu (laseru). Bezplatne kontaktujte zákaznický servis na nižšie uvedených číslach.
- ⚠ Nikdy nepoužívajte na žiadnu časť svojho HairMaxu acetón ani iné rozpúšťadlá. Použitie rozpúšťadiel na okne môže blokať prechod laserového svetla.

United States and Canada 1-866-527-3726










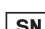





United Kingdom 0808-134-9868

Australia 1-800-937-358

## Riziká

HairMax bol klinicky testovaný na mužoch aj ženách. V klinickej štúdii pre mužov 5% mužov uviedlo, že pri používaní HairMaxu mali svrbenie alebo mravčenie. Žiadna zo žien v klinickej štúdii neuviedla žiadny z týchto vedľajších účinkov. Ak máte svrbenie, brnenie alebo akýkoľvek iný vedľajší účinok, ktorý vás obťažuje, prestaňte používať svoj HairMax a kontaktujte zákaznícky servis spoločnosti Lexington bezplatne na číslach uvedených nižšie.

## Symbols

	Európska zhoda		Zapnutie/vypnutie
	WECC		Prečítajte si návod na obsluhu
	Výstraha		RF rušenie
	Pozor		Aplikovaná časť typu BF
	Laser		Sériové číslo
	Laserové varovanie		Stupeň odolnosti proti vlhkosti
	Indikácia clony laserom		ESD nízkej úrovne
	Laserový výstražný štítok		

## Testovanie citlivosti HairMaxu

Pred začatím liečby nezabudnite vyskúšať citlivosť HairMaxu. Zapnite prístroj, držte HairMax na jednom mieste a sviette svetlom na predlaktie. Po dvoch minútach prístroj vypnite a odložte nabok. Pozerať sa na miesto, kde ste držali laserové svetlo počas nasledujúcich päť minút.

Ak sa u vás neobjaví žiadna reakcia, pokračujte v liečbe podľa pokynov na strane 11. Ak spozorujete akúkoľvek reakciu, ako je začervenanie alebo vyrážka, nepoužívajte HairMax. Bezplatne kontaktujte zákaznícky servis na nižšie uvedených číslach alebo v mieste nákupu.

[United States and Canada](#) 1-866-527-3726

[United Kingdom](#) 0808-134-9868

[Australia](#) 1-800-937-358

# MONITOROVANIE ZARIADENIA | REŽIM ZLYHANIA | ŽIVOTNOSŤ ZARIADENIA

## Monitorovanie zariadenia

Počas výroby bol váš HairMax starostlivo kontrolovaný a testovaný. Pri správnej funkcii sa rozsvietia svetelné indikátory na tlačidlo napájania aj laserové tlačidlá. Cez okno v spodnej časti zariadenia svieti červené laserové svetlo.

NEPOZERAJTE sa priamo na laserové svetlo. Posviette si laserovým svetlom na dlaň a skontrolujte, či sa rozsvieti červené laserové svetlo.

Ak kontrolka zariadenia nesvieti alebo ak sa laserové svetlo nerozsvieti, kontaktujte bezplatný zákaznícky servis na číslach uvedených nižšie.

## Režim zlyhania zariadenia

Váš HairMax je navrhnutý tak, aby vydržal mnoho rokov pravidelného používania. Laserové svetlo časom nevybledne ani sa jeho kvalita nezníži. Na konci životnosti lasera alebo pri zlyhaní z akéhokoľvek iného dôvodu, červené laserové svetlo už nebude svietiť.

## Očakávaná životnosť zariadenia

HairMax je zdravotnícka pomôcka vyrobená pod prísnou kontrolou kvality a validovaná prostredníctvom GMP (Good Manufacturing Practices). HairMax obsahuje vysoko kvalitné laserové diódy určené pre optimálny výkon.

Na základe tohto hodnotenia a životnosti použitých komponentov je váš HairMax navrhnutý tak, aby vydržal mnoho rokov pravidelného používania. Pred použitím prístroja HairMax si prosím prečítajte celý tento návod na obsluhu.

[United States and Canada](#) 1-866-527-3726

[United Kingdom](#) 0808-134-9868

[Australia](#) 1-800-937-358



# KLINICKÁ ŠTÚDIA U MUŽOV

Klinické štúdie sa uskutočňovali na viacerých miestach v USA. Účastníkmi štúdie boli muži so svetlým až hnedým typom pleti a s diagnostikovanou androgénnou alopeciou, ktorá zahŕňa dedičné vypadávanie vlasov. Subjekty boli rozdelené do dvoch skupín, HairMax skupina a kontrolná skupina. Ovládacie zariadenie vyzeralo rovnako ako zariadenie HairMax, neobsahovalo však laserové svetlo. Klinické štúdie dodržiavali všetky smernice GCP (Good Clinical Practice), boli schválené IRB (Institutional Review Board) a uvedené na [www.clinicaltrials.gov](http://www.clinicaltrials.gov).

Počas 6-mesačnej klinickej štúdie si subjekty ošetrovali vlasy jedenkrát denne, trikrát týždenne v každý druhý deň. Počet hrubých, normálnych zdravých chlpkov v cieľovej zóne sa počítal v 1. týždni, 16. týždni a 26. týždni.

Výsledky 26-týždňovej liečby ukázali, že u viac ako 90% mužov došlo k zvýšeniu počtu vlasov. \*


Subjekty v štúdiu nezaznamenali žiadne závažné nežiadúce účinky. Počet a typy nežiadúcich účinkov boli v skutočnosti podobné v skupine HairMax aj v kontrolnej skupine.

## Zmena rastu vlasov

V klinickej štúdiu sa po 26 týždňoch liečby prístrojmi HairMax oproti kontrolnému prístroju zistilo zvýšenie počtu vlasov, ktoré môžete vidieť v grafe.



Mean Terminal Hair Count Changes  
From Baseline in **MALES**  
26 Weeks, Observed Hair Count

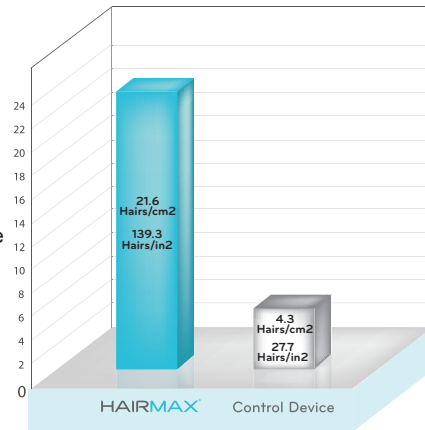

\* Na základe minimálne 5 nových vlasov na centimeter štvorcový / 32 nových vlasov na palec štvorcový, ktoré boli pozorované pri následnej návšteve.

# KLINICKÁ ŠTÚDIA U ŽIEN

Klinické štúdie sa uskutočňovali na viacerých miestach v USA. Účastníkmi štúdie boli ženy so svetlým až hnedým typom pleti a s diagnostikovanou androgénnou alopeciou, ktorá zahŕňa dedičné vypadávanie vlasov. Subjekty boli rozdelené do dvoch skupín, HairMax skupina a kontrolná skupina. Ovládacie zariadenie vyzeralo rovnako ako zariadenie HairMax, neobsahovalo však laserové svetlo. Klinické štúdie dodržiavali všetky smernice GCP (Good Clinical Practice), boli schválené IRB (Institutional Review Board) a uvedené na [www.clinicaltrials.gov](http://www.clinicaltrials.gov).

Počas 6-mesačnej klinickej štúdie si subjekty ošetrovali vlasy jedenkrát denne, trikrát týždenne v každý druhý deň. Počet hrubých, normálnych zdravých chĺpkov v cieľovej zóne sa počítal v 1. týždni, 16. týždni a 26. týždni.

Výsledky v 26. týždni ukázali, že viac ako 90% žien zaznamenalo nárast počtu vlasov. \*

Subjekty v štúdiu nezaznamenali žiadne závažné nežiaduce účinky. V skutočnosti počet a typy nežiaducich účinkov boli podobné v skupine HairMax aj v kontrolnej skupine.


## Zmena počtu vlasov

V klinickej štúdii sa po 26 týždňoch liečby prístrojmi HairMax oproti kontrolnému prístroju zistilo zvýšenie počtu vlasov, ktoré môžete vidieť v grafe.




\* Na základe minimálne 5 nových vlasov na centimeter štvorcový / 32 nových vlasov na palec štvorcový, ktoré boli pozorované pri následnej návšteve

Mean Terminal Hair Count Changes  
From Baseline in **FEMALES**  
26 Weeks, Observed Hair Count

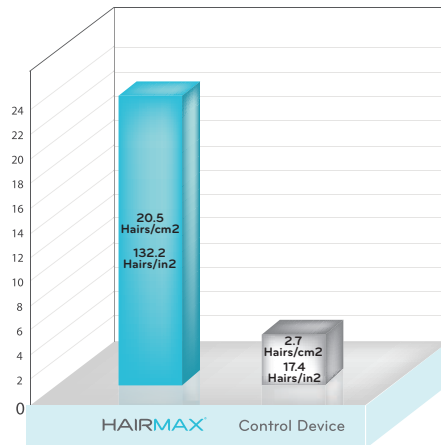

# PREHL'AD ZARIADENIA

Ultima 9 Classic a Ultima 12 Classic sú identické modely, ktoré sa líšia iba počtom diód a časom liečby.

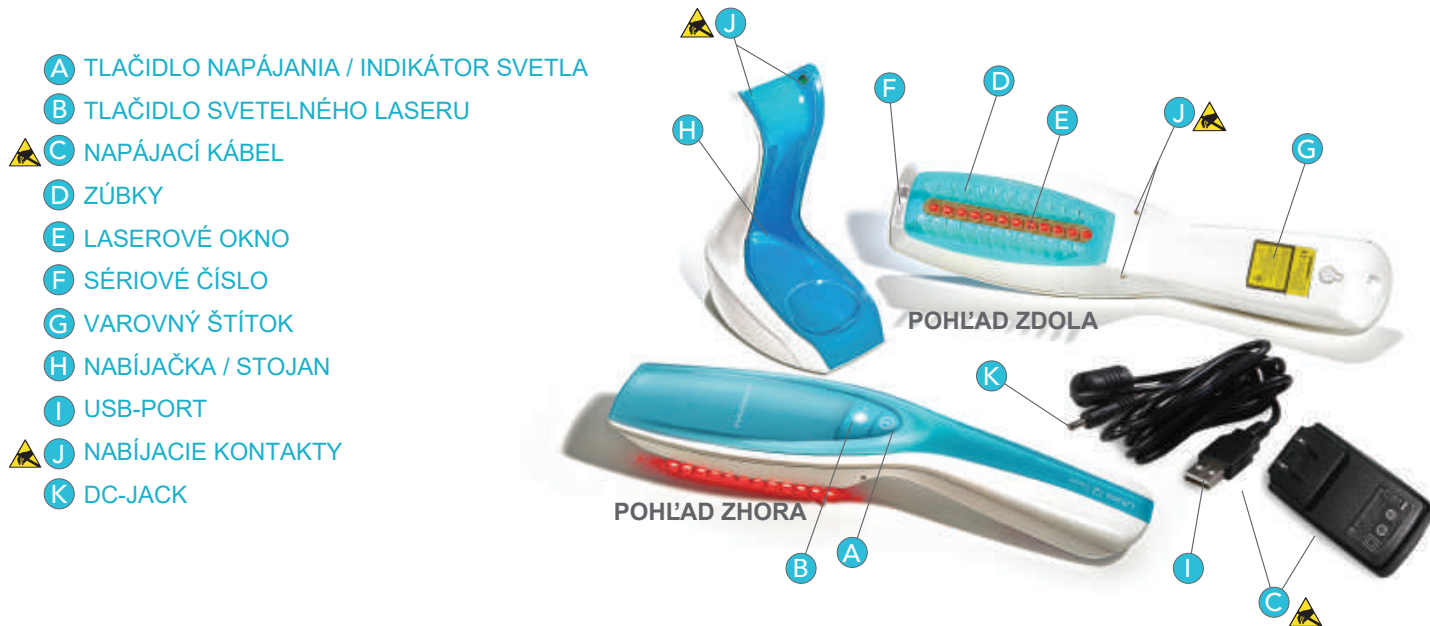

## Začíname

Vaše modely HairMax Ultima 9 Classic a Ultima 12 Classic sa vyrábajú s trvalo nainštalovanou nabíjateľnou batériou. Návod na použitie si prečítajte skôr, ako začnete používať váš HairMax. Pokyny pre toto zariadenie sú určené pre jednotlivcov od 15 rokov. HairMax je bezpečný pre domáce použitie.




Použite **HairMax Ultima 9 Classic** na liečbu po dobu 11 minút, a **HairMax Ultima 12 Classic** v trvaní 8 minút, tri ošetrenia týždenne. Liečba by mala byť rozložená každý druhý deň, napríklad Pondelok,

Streda, Piatok. Nepoužívajte HairMax viac, ako je denná odporúčaná doba liečby. Väčšina používateľov vidí výsledky už za 16 týždňov (na základe klinických štúdií).


Keď dostanete HairMax, vyberte všetky časti z puzdra. Pred prvým použitím musíte svoj HairMax nabíjať 2-3 hodiny.

## Možnosti nabíjania

**MOŽNOSŤ 1** Nabíjanie vášho HairMaxu pomocou nabíjacieho stojana a napájacieho kábla. Pred vložením HairMaxu do stojana sa uistite, že je HairMax vypnutý a zúbky smerujú od vás. Zapojte napájací kábel do stojana a druhý koniec do elektrickej zásuvky. Počas nabíjania bude blikať kontrolka prístroja. Úplne nabitá batéria vydrží až šesť ošetrení.

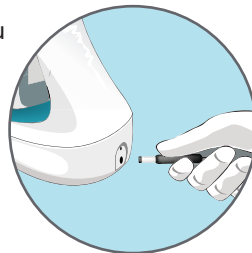


**MOŽNOSŤ 2** Nabíjajte svoj HairMax vložením napájacieho kábla priamo do HairMaxu a druhým koncom do elektrickej zásuvky. Počas nabíjania bude kontrolka na tlačidle napájania blikať.

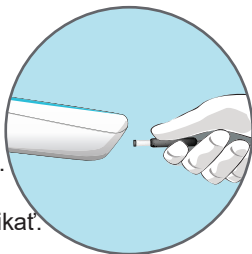

Po dokončení nabíjania svetlo prestane blikať. Počas používania bude kontrolka indikovať úroveň nabitia batérie. Stále svetlo signalizuje plné nabitie batérie.

Keď je batéria úplne nabitá, rozsvieti sa kontrolka. Keď sa energia batérie zníži, svetlo bude pomaly blikať. Keď je batéria takmer vybitá a je potrebné opätovné nabitie, svetlo začne rýchlo blikať. Ak k tomu dôjde, nabíjajte svoj HairMax jednou z možností nabíjania opísaných na strane 10.

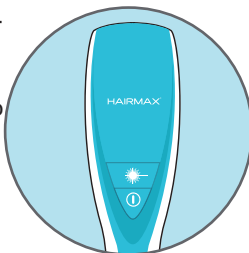


## Správne použitie

HairMax Ultima 9 Classic by sa mal používať 11 minút a HairMax Ultima 12 Classic 8 minút.

Na načasovanie liečby použite hodinky alebo stopky.

Najskôr stlačte vypínač a podržte ho, kým sa nerozsvieti kontrolka vypínača. Ako druhé stlačte laserové tlačidlo. Váš HairMax je pripravený na použitie.

Posviette si HairMax na dlaň a uvidíte, že laserové svetlo svieti (nepozerajte sa priamo na laserové svetlo). Nepoužívajte svoj HairMax, ak je chybný alebo poškodený, obráťte sa na zákaznícky servis HairMax alebo na miesto nákupu.

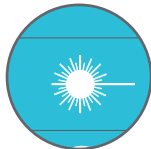

## Pokyny pri ošetrovaní

Pred začatím liečby nezabudnite otestovať citlivosť HairMaxu (strana 5).


Po zapnutí zariadenia si ho položte na temeno hlavy tak, aby sa obidva rady zubov dotýkali pokožky hlavy.

Začnite od strednej vlasovej línie.

Pohybujte HairMaxom spredu dozadu po pokožke hlavy pomalým česacím pohybom, každý 1 cm pozastavte na 4 sekundy.

Pri prechode spredu dozadu nezdvihajte HairMax z pokožky hlavy.

Potom zdvihnite HairMax z pokožky hlavy a začnite v novej polohe v línii vlasov.

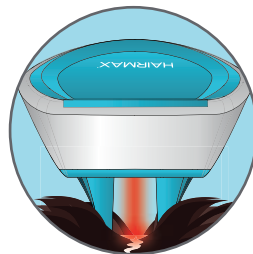

## POKYNY PRI OŠETRENÍ

Týmto spôsobom pokračujte spredu dozadu a potom zo strany na stranu, kým si viacnásobným priechodom nezakryjete celú pokožku hlavy.

Opakujte tieto kroky počas ošetrovania 8 minút pre modely Ultima 12 a 11 minút pre modely Ultima 9.

Ak máte dlhé vlasy, zdvíhajte ich prstami z vlasov a pri používaní HairMaxu sa uistite, že sa laserové svetlo dostane až na pokožku hlavy.

**DÔLEŽITÉ:** Pri pohybe spredu dozadu nezdvíhajte HairMax z hlavy (pokiaľ nekontrolujete čas používania na informačnom displeji alebo kým nedokončíte líniu). Váš HairMax má pár hrebeňových zubov, ktoré rozdeľujú vlasy tak, aby sa svetlo efektívnejšie dostávalo na pokožku hlavy. Počas odporúčanej doby liečby urobte niekoľko úplných prechodov po pokožke hlavy.




Keď je váš HairMax zapnutý, bude pípať a vibrovať každé 4 sekundy. To znamená, že je čas presunúť HairMax na ďalšiu oblasť hlavy. Keď to urobíte, nezdvíhajte zariadenie z pokožky hlavy.

Ak chcete počas liečby vypnúť zvukový signál alebo vibrácie, stlačte horné laserové tlačidlo jedenkrát. Váš HairMax a laser zostanú zapnuté.

Ak chcete znova aktivovať pípanie a vibrácie, dvakrát stlačte laserové tlačidlo.

Vypnite svoj HairMax stlačením a podržaním vypínača (spodné tlačidlo), kým nezhasne kontrolka. Uložte zariadenie do nabíjacieho stojana pre ďalšie použitie. Napájací kábel môžete kedykoľvek nechať pripojený k nabíjacej kolíske.

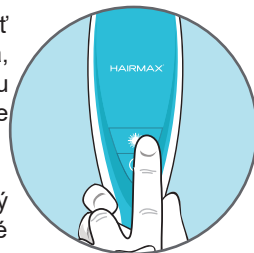

# OBSAH BALENIA

## Dôležité:

- Je dôležité hýbať s HairMaxom veľmi pomaly. Pamätajte, že pokožku hlavy ošetrujete laserovým svetlom. Ak sa hýbete príliš rýchlo, nedosiahne ošetrovanie optimálne výsledky.
- Celkový čas potrebný na ošetrovanie HairMax Ultima 9 Classic je 11 minút a HairMax Ultima 12 Classic je 8 minút.

Obsah balenia:



Ultima 9 Classic  
or  
Ultima 12 Classic



Nabíjačka/Stojan



Napájací kábel



Návod na použitie



Sprievodca rýchlym  
spustením

Poznámka: Celá zostava zariadenia HairMax sa považuje za aplikovanú súčasť

# RIEŠENIE PROBLÉMOV

AKÝKOL'VEK POKUS O SAMOSTATNÚ OPRAVU A NASTAVENIE ZARIADENIA OKREM SLUŽBY POUŽÍVANIA HAIRMAX NESPADÁ POD VAŠU ZÁRUKU

HairMax má pokrokovú elektroniku, ktorá zaisťuje, že zariadenie pracuje tak, ako má a dodáva správne množstvo laserovej energie. Ak máte z nejakého dôvodu ťažkosti so zariadením, vyskúšajte jeden z nasledujúcich tipov:

## Váš HairMax sa nezapne:

- Najčastejšie označuje vybitú batériu, ktorú je potrebné nabiť
- Je potrebné batériu nabiť pomocou jednej z možností nabíjania popísaných na strane 10 a ustíte sa, že je vaše zariadenie úplne nabité
- Váš HairMax sa nedá zapnúť, keď je napájací kábel zapojený.

## Ak sa váš HairMax počas používania vypne:

- Najčastejšie označuje vybitú batériu.
- Je potrebné batériu nabiť pomocou jednej z možností nabíjania popísaných na strane 10 a ustíte sa, že je vaše zariadenie úplne nabité.
- Váš HairMax sa nedá zapnúť, keď je napájací kábel zapojený.

## Ak sa váš HairMax nevypne:

- Stlačte a podržte tlačidlo napájania na 4 sekundy.

Ak vaše zariadenie HairMax pípa/vibruje nepravidelne alebo ak nepípa a nevibruje vôbec

- Pomocou jednej z možností nabíjania popísaných na strane 10 sa uistíte, že je vaše zariadenie úplne nabité.

Ak vaše zariadenie Hair Max pípa a vibruje, ale nesvieti laserové svetlo.

- Najčastejšie označuje vybitú batériu, ktorú je potrebné nabiť
- Pomocou jednej z možností nabíjania popísaných na strane 10 sa uistíte, že je vaše zariadenie úplne nabité.
- Váš HairMax sa nedá zapnúť, keď je napájací kábel zapojený.

V prípade ďalších otázok, kontaktujte bezplatný zákaznícky servis na nižšie uvedených číslach.

## Corporate Office – Customer Service – Warranty Repairs

Lexington Intl., LLC  
1040 Holland Drive  
Boca Raton, Florida 33487 USA

Direct line +1 561-417-0200

United States and Canada 1-866-527-3726

United Kingdom 0808-134-9868

Australia 1-800-937-358

Monday - Friday 9 AM - 5 PM EST



# VAROVNÝ ŠTÍTOK I LASEROVÉ PARAMETRE I PODMIENKY POUŽITIA I ŠPECIFIKÁCIE NAPÁJANIA

VAROVNÝ ŠTÍTOK I   LASEROVÉ PARAMETRE I PODMIENKY POUŽITIA	
Vlnová dĺžka:	655nm +/- 10nm viditeľné červené svetlo
Výkon laseru pre kvalifikáciu:	<5mW CW
Divergencia:	57 mrad
Počet laserov:	9 (Ultima 9 Classic model), 12 (Ultima 12 Classic model)
Tento laserový výrobok je počas všetkých prevádzkových postupov označený ako trieda 3R.	
Poznámky :	Laserové zariadenia HairMax neobsahujú žiadne časti opraviteľné používateľom.
Umiestnenie výstražného štítku:	Biely štítok nad zubkami
Laserové MTBF: stredná doba medzi poruchami:	10,000 hours at 25°C teplota okolia
Prevádzková teplota/nadmorská výška/atmosférický tlak /vlhkosť:	0°C to 40°C/0 to 2,000 m/80kPa to 106kPa/0% to 90%, relatívna vlhkosť
Teplota / vlhkosť / atmosférický tlak pri skladovaní a preprave:	- 20°C to 60° C/0% to 90%, relatívna vlhkosť 50kPa to 106kPa
Vniknutie vody alebo pevných častíc:	IP22
Cykly nabíjania batérie :	300 cyklov
ROHS: obmedzenie nebezpečných látok:	2011/65/EU
Veľkosť a hmotnosť zariadenia:	25.5 x 6.3 x 5 cm / 218 gramov
Záruka:	2 roky
Vek použitia:	Dospelí



Sériové číslo



Varovný štítok



## Špecifikácie napájacieho zdroja:

Výstup = 5V DC-1,0A. Zástrčka: 9 mm x 3,5 mm, stred pozitívny.

Zdroj napájania pre váš HairMax je možné používať v Spojených štátoch a medzinárodne. Tento napájací zdroj sa prispôbi všetkým napájacím zdrojom od 100 V / 60 Hz (USA) do 240 V / 50 Hz. Ak majú zásuvky vo vašej krajine odlišné zástrčky ako napájanie dodávané s prístrojom HairMax, použite lacný zásuvkový adaptér, ktorý sa nedodáva so zariadením.

## Údržba

HairMax je navrhnutý tak, aby vydržal mnoho rokov. Okrem pravidelného čistenia nevyžaduje žiadnu inú údržbu. Váš HairMax je určený iba na použitie v interiéroch.

## Čistenie vášho HairMax

- Udržujte HairMax čistý
- Vypnite HairMax stlačením a podržaním napájania tlačidlo (spodné tlačidlo), kým nezhasne svetlo.
- Odpojte napájací kábel zo zariadenia a taktiež z elektrickej zásuvky v stene
- Očistite laserové okienko mäkkou mierne navlhčenou handričkou. Nepoužívajte acetón ani rozpúšťadlá.
- Ak chcete zúbky vyčistiť dôkladnejšie, posuňte ich smerom k vrchu HairMaxu a jemne vytiahnite. Čistite mydlom a vodou. Nepoužívajte žiadne rozpúšťadlá alebo drsné čistiace prostriedky.
- Pri výmene zúbkov zarovnajzte vodiace lišty a posúvajte nadol, kým sa zafixujú na svojom mieste. Ak potrebujete vymeniť zuby, môžete ich objednať online na [hairmax.com](http://hairmax.com) alebo zavolať na zákaznícky servis.

## Pokyny na likvidáciu - recyklácia


















Tento symbol na produkte alebo na jeho obale naznačuje, že tento produkt nesmie byť likvidovaný spolu s iným domovým odpadom. Namiesto toho je vaša zodpovednosťou zlikvidovať vaše odpadové zariadenie odovzdaním na určenom zbernom mieste na recykláciu použitých elektrických a elektronických zariadení. Triedený zber a recyklácia vášho odpadového zariadenia v čase jeho likvidácie pomôže chrániť prírodné zdroje a zaistiť ich recykláciu spôsobom, ktorý chráni ľudské zdravie a životné prostredie. Viac informácií o tom, kde môžete odovzdať svoje odpadové zariadenie na recykláciu, získate od miestneho úradu alebo od služby likvidácie domového odpadu.

## Elektrická bezpečnosť

Pri používaní tohto alebo iného elektrického zariadenia je potrebné dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia, najmä ak sú prítomné deti.

 **POZOR:** Uchovávať mimo dosahu vody. Kontakt s vodou môže spôsobiť elektrický šok.

### Na zníženie rizika zasiahnutia elektrickým prúdom:

-  Nepoužívajte počas kúpania.
-  Neumiestňujte ani neskladujte svoj HairMax na miestach, kde môže spadnúť do vane alebo umývadla.
-  Nevystavujte svoj HairMax tečúcej vode ani ho nehádzte do vody alebo inej tekutiny. Ak váš HairMax spadne do vody, okamžite ho vytiahnite zo zásuvky.
-  Ak používate HairMax v blízkosti vody, odporúča sa použitie elektrickej zásuvky chránenej prerušovačom zemného spojenia.
-  Nehádzte svoj HairMax do ohňa ani ho neskladujte pri vysokých teplotách vyšších ako 60 ° C.
-  Počas nabitia nezapínajte a nepoužívajte svoj HairMax.
-  Napájanie nie je možné počas používania oddeliť. Neumiestňujte zariadenie tak, aby bolo ťažké zapojiť alebo vytiahnuť napájací kábel.
  
-  Ak máte akékoľvek problémy s týmto prístrojom, napríklad s nastavením, údržbou alebo používaním, obráťte sa na zákaznícky servis.
-  Ak dôjde k neočakávanej manipulácii alebo udalosti, informujte zákaznícky servis.
-  Po páde / náraze, ktorý môže spôsobiť zmeny výkonu, kontaktujte zákaznícky servis.
-  Buďte opatrný, nedávajte si napájací kábel na krk, mohlo by vás to uškrtiť.
-  Uchovávať prístroj mimo dosahu detí / domácich miláčikov, aby ste zabránili vdýchnutiu alebo prehltnutiu malých častí.
-  Nepoužívajte prístroj, ak je akýmkoľvek spôsobom poškodený. Neustále používanie poškodenej jednotky môže spôsobiť zranenie, nesprávne výsledky alebo vážne nebezpečenstvo. Prístroj by sa mal používať iba s príslušenstvom odporúčaným výrobcom.
-  Ak prístroj s adaptérom nepoužívate, uskladnite ho v suchej miestnosti a chráňte ho pred vlhkosťou, teplom, prachom a priamym slnečným žiarením.
-  Na odkladaciu skrinku nikdy nekladte ťažké predmety.

# NÁVOD NA ELEKTROMAGNETICKÉ EMISIE

## Pokyny a vyhlásenie výrobcu - elektromagnetické emisie

Ultima 12 (KM908) a Ultima 9 (KM907) sú určené na použitie v nižšie uvedenom elektromagnetickom prostredí. Zákazník alebo užívateľ modelu Ultima 12 (KM908) a Ultima 9 (KM907) by mal zaručiť, že sa používa v takom prostredí.

Emisný test	Súlady	Vedenie elektromagnetického prostredia
RF emisie CISPR 11	Skupina 1	Ultima 12 (KM908) a Ultima 9 (KM907) využívajú RF energiu iba na svoju vnútornú funkciu. Preto sú jeho RF emisie veľmi nízke a je nepravdepodobné, že by spôsobovali akékoľvek rušenie blízkych elektronických zariadení.
RF emisie CISPR 11	Trieda B	
Harmonické emisie IEC 61000-3-2	Trieda A	
Kolísanie napätia / zvyšovanie vyžarovania IEC 61000-3-3	Súlady	

Toto zariadenie bolo testované a bolo zistené, že vyhovuje obmedzeniam pre digitálne zariadenie triedy B v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením pri inštalácii v domácnosti. Toto zariadenie generuje, používa a môže vyžarovať vysokofrekvenčnú energiu a ak nie je nainštalované a nepoužívané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovkej komunikácie. Nie je však zaručené, že pri konkrétnej inštalácii nedôjde k rušeniu. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rádiového alebo televízneho príjmu, čo sa dá zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, používateľovi sa odporúča, aby sa pokúsil rušenie napraviť jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:

- Presmerujte alebo premiestnite prijímaciu anténu.
- Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Pripojte zariadenie do zásuvky v inom obvode, ako je zapojený do prijímača.
- Požiadajte o pomoc predajcu alebo skúseného rádio / TV technika.

Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam: (1) toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaduce fungovanie.

# NÁVOD NA ELEKTROMAGNETICKÚ IMUNITU

## Pokyny a vyhlásenie výrobcu - elektromagnetická imunita

Ultima 12 (KM908) a Ultima 9 (KM907) sú určené na použitie v nižšie uvedenom elektromagnetickom prostredí. Užívateľ modelu Ultima 12 (KM908) a Ultima 9 (KM907) by mala zaručiť, že sa používa v prostredí, v ktorom je určený.

Skúška imunity	IEC 60601 test level	Úroveň súladu	Vedenie elektromagnetického prostredia
Elektrostatický výboj (ESD) IEC 61000-4-2	± 6 kV contact ± 8 kV air	± 6 kV contact ± 8 kV air	Podlahy by mali byť drevené, betónové alebo keramické. Ak sú podlahy pokryté syntetickým materiálom, relatívna vlhkosť vzduchu by mala byť minimálne 30%.
Elektrický rýchly prechod / zhluk IEC 61000-4-4	± 2 kV pre napájacie vedenia ± 1 kV pre vstupné / výstupné vedenia	± 2 kV pre napájacie vedenia Neaplikovateľné	Kvalita napájania zo siete by mala zodpovedať typickému komerčnému alebo nemocničnému prostrediu.
Prepätie IEC 61000-4-5	± 1kV line(s) to line(s) ± 2kV line(s) to earth	± 1kV differential mode Not Applicable	Kvalita napájania zo siete by mala zodpovedať typickému komerčnému alebo nemocničnému prostrediu.
Poklesy napätia, krátke prerušenia a zmeny napä- tia na vstupných vedeniach napájacieho zdroja IEC 61000-4-11	<5% UT (> 95% pokles v UT) pre 0,5 cyklu 40% UT (60% pokles v UT) pre 5 cyklov 70% UT (30% pokles v UT) pre 25 cyklov <5% UT (> 95% pokles) v UT) na 5 s	<5% UT (> 95% pokles v UT) pre 0,5 cyklu 40% UT (60% pokles v UT) pre 5 cyklov 70% UT (30% pokles v UT) pre 25 cyklov <5% UT (> 95% pokles) v UT) na 5 s	Kvalita napájania zo siete by mala zodpovedať typickému komerčnému alebo nemocničnému prostrediu. Ak je používateľ Ultima 12 (KM908) a Ultima 9 (KM907) vyžadujú nepretržitú prevádzku počas prerušenia napájania, odporúča sa, aby boli Ultima 12 (KM908) a Ultima 9 (KM907) napájané z neprerušiteľného zdroja napájania alebo z batérie.
Sieťová frekvencia (50 Hz / 60 Hz), magnetická oblasť, IEC 61000-4-8	3 A/m	3 A/m	Silové magnetické polia by mali byť na úrovniach charakteristických pre typické umiestnenie v typickom komerčnom alebo nemocničnom prostredí.

POZNÁMKA UT je a.c. sieťové napätie pred aplikáciou testovacej úrovne.

# NÁVOD NA ELEKTROMAGNETICKÚ IMUNITU

## Pokyny a vyhlásenie výrobcu - elektromagnetická imunita

The Ultima 12(KM908) and Ultima 9(KM907) are intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer or the user of the Ultima 12(KM908) and Ultima 9(KM907) should assure that it is used in such an environment.

Test odolnosti	IEC 60601testovacia úroveň	Úroveň zhody	Vedenie elektromagnetického prostredia
Vedené RF IEC 61000-4-6	3 Vrms 150 kHz to 80 MHz	3 Vrms	Prenosné a mobilné vysokofrekvenčné komunikačné zariadenia by sa nemali používať bližšie ako ktorákoľvek iná časť zariadení Ultima 12 (KM908) a Ultima 9 (KM907) vrátane káblov, ako je odporúčaná separačná vzdialenosť vypočítaná z rovnice platnej pre frekvenciu vysielača. Odporúčaná rozstupová vzdialenosť: $d = 1,2 \sqrt{P}$ $d = 1,2 \sqrt{P}$ 80 MHz až 800 MHz $d = 2,3 \sqrt{P}$ 800 MHz až 2,5 GHz Kde P je maximálny výstupný výkon vysielača vo wattoch (W) podľa výrobcu vysielača ad je odporúčaná rozstupová vzdialenosť v metroch (m). Intenzita poľa z pevných RF vysielačov stanovená elektromagnetickým prieskumom miesta, a by mala byť nižšia ako úroveň zhody v každom frekvenčnom rozsahu. B V blízkosti zariadenia označeného týmto symbolom sa môže rušiť.
Vyžarované RF IEC 61000-4-3	3 V/m 80 MHz to 2.5 GHz	3 V/m	

POZNÁMKA 1 Pri frekvenciách 80 MHz a 800 MHz platí vyšší frekvenčný rozsah.

POZNÁMKA 2 Tieto pokyny nemusia platiť vo všetkých situáciách. Šírenie elektromagnetického žiarenia je ovplyvnené absorpciou a odrazom od štruktúr, predmetov a osôb.

- a Intenzitu poľa z pevných vysielačov, ako sú základňové stanice pre rádiové (bunkové / bezdrôtové) telefóny a pozemné mobilné rádiá, amatérske rádiá, rozhlasové vysielanie v pásme AM a FM a televízne vysielanie, nemožno teoreticky presne predpovedať. Na hodnotenie elektromagnetického prostredia v dôsledku pevných RF vysielačov by sa mal zvážiť elektromagnetický prieskum miesta. Ak nameraná pevnosť poľa v mieste, kde sa používajú Ultima 12 (KM908) a Ultima 9 (KM907), prekračuje príslušnú vyššiu uvedenú úroveň zhody RF, mali by sa na overenie normálu dodržať Ultima 12 (KM908) a Ultima 9 (KM907). prevádzka. Ak spozorujete abnormálny výkon, môžu byť potrebné ďalšie opatrenia, napríklad zmena orientácie alebo premiestnenie Ultima 12 (KM908) a Ultima 9 (KM907).
- b Vo frekvenčnom rozsahu 150 kHz až 80 MHz by mali byť intenzity poľa menšie ako 3 V / m.



# ODPORÚČANIA PRE ELEKTROMAGNETICKÚ VZDIALENOSŤ

## Odporúčané separačné vzdialenosti medzi prenosným a mobilným vysokofrekvenčným komunikačným zariadením a modelmi Ultima 12 (KM908) a Ultima 9 (KM907))

Ultima 12 (KM908) a Ultima 9 (KM907) sú určené na použitie v elektromagnetickom prostredí, v ktorom sú riadené vyvíjajúce vysokofrekvenčné rušenia. Zákazník alebo používateľ počítačov Ultima 12 (KM908) a Ultima 9 (KM907) môže pomôcť zabrániť elektromagnetickému rušeniu udržaním minimálnej vzdialenosti medzi prenosnými a mobilnými vysokofrekvenčnými komunikačnými zariadeniami (vysielačmi) a počítačmi Ultima 12 (KM908) a Ultima 9 (KM907).), ako sa odporúča ďalej, podľa maximálneho výstupného výkonu komunikačného zariadenia.

Menovitý maximálny výstupný výkon vysielача (W)	Separačná vzdialenosť podľa frekvencie vysielача (m)		
	150 kHz to 80 MHz $d = 1,2\sqrt{P}$	80 MHz to 800 MHz $d = 1,2\sqrt{P}$	800 MHz to 2.5 GHz $d = 2,3\sqrt{P}$
0.01	0.12	0.12	0.23
0.1	0.38	0.38	0.73
1	1.2	1.2	2.3
10	3.8	3.8	7.3
100	12	12	23

Pre vysielачe s maximálnym výstupným výkonom, ktorý nie je uvedený vyčíslenie, možno odporúčanú vzdialenosť  $d$  v metroch (m) odhadnúť pomocou rovnice platnej pre frekvenciu vysielача, kde  $P$  je maximálny výstupný výkon vysielача vo wattoch (W) podľa výrobcu vysielача.

POZNÁMKA 1 Pri 80 MHz a 800 MHz platí separačná vzdialenosť pre vyčíslenie frekvenčný rozsah.

POZNÁMKA 2 Tieto pokyny nemusia platiť vo všetkých situáciách. šírenie elektromagnetického žiarenia je ovplyvnené absorpciou a odrazom od objektov, predmetov a osôb.

# ZÁRUKA

AKÝKOL'VEK POKUS O SAMOSTATNÚ SLUŽBU A OPRAVU VÁŠHO ZARIADENIA, POKIAĽ IDE O INŠTRUKCIU ZÁKAZNÍCKOU SLUŽBOU HAIRMAX, ZABRÁNI VAŠEJ ZÁRUKE.

SPOLOČNOSŤ LEXINGTON INTERNATIONAL, LLC GARANTUJE HAIRMAX PROTI VADÁM V MATERIÁLOCH ALEBO PRACOVNOM LISTE NA 24 MESIACOV OD DÁTUMU KÚPY. AK TENTO VÝROBOK MÁ ZÁVADU, LEXINGTON TO V PRÍPADE OBDOBIA ZÁRUKY OPRAVÍ ALEBO VYMENÍ, PODĽA JEJ MOŽNOSTI.

PO ZÁRUČNEJ DOBE JE UŽIVATEĽ POVINNÝ ZAPLATIŤ ZA VŠETKY DIELY A PRÁCU. AK JE PRODUKT OPRAVOVANÝ ALEBO VYMENENÝ, AŽ MIMO ZÁRUČNÉHO OBDOBIA, LEXINGTON SI VYHRADUJE PRÁVO POSKYTOVAŤ ROVNOSTŤNÉ ČASTI V RÔZNYCH FARBÁCH VÁŠHO PÔVODNÉHO VÝROBKU. .

TÁTO ZÁRUKA NEZAHŔŇA ŠKODY SPÔSOBENÉ ŽIVELNÝMI POHROMAMI, NESPRÁVNÝM POUŽÍVANÍM, NEGLIGENCIOU, NEHODOU ALEBO ÚPRAVOU NEJAKEJ ČASTI VÝROBKU. TÁTO ZÁRUKA NEZAHŔŇA POŠKODENIE VPLYVOM NESPRÁVNEJ PREVÁDZKY ALEBO ÚDRŽBY, PRIPOJENIA K NESPRÁVNEMU NAPÁJANIU NAPÁTIA ALEBO OPRAVOU KÝMKOL'VEK INÝM NEŽ LEXINGTON. TÁTO ZÁRUKA JE NEPLATNÁ, AK JE TEMPEROVANÝ VÝROBOK.

NA ZÍSKANIE ZÁRUČNEJ SLUŽBY MUSÍTE VOLAŤ ZÁKAZNICKÚ SLUŽBU HAIRMAX, ABYSTE VYŽIADALI AUTORIZOVANÉ ČÍSLO. MUSÍTE UHRADIŤ NÁKLADY NA DOPRAVU, VO SVOJOM ORIGINÁLNOM OBALE ALEBO OBALE PODĽA ROVNAKÉHO STUPŇA OCHRANY, SPOLU S VÁŠM NÁZOVOM A ADRESOU, DO:

Lexington International, LLC, 1040 Holland Drive, Boca Raton, FL 33487, USA

OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI; ODŠKODNENIE: OKREM VÝSKYTNE UVEDENÉHO VÝŠE UVEDENÉHO, LEXINGTON INTERNATIONAL, LLC NESE ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIADNE ŠPECIÁLNE, NEPRIAME alebo NÁSLEDNÉ ŠKODY, KTORÉ SÚ PRIAMO ALEBO NEPRIAMO SÚVISIACE S POUŽÍVANÍM ALEBO NEMOŽNOSŤOU POUŽITIA, HAIRMAX, AJ AK JE SPOLOČNOSŤ LEXINGTON INTERNATIONAL, LLC, PORADENÁ O MOŽNOSTI TAKÝCHTO POŠKODENÍ, AK ZIŽDEJ V ZMLUVE, NEGLIGENCII ALEBO INÝCH ÚNAVŇÝCH ČINNOSTIACH. NIEKTORÉ ŠTÁTY NEUMOŽŇUJÚ VYLÚČENIE ALEBO OBMEDZENIE NÁHODNÝCH ALEBO NÁSLEDNÝCH ŠKODÍ, TAKŽE SA VÁS VYŠŠIE UVEDENÉ OBMEDZENIE ALEBO VYLÚČENIE NEMUSÍ VZŤAHOVAŤ.

ROZHODNÉ PRÁVO: POUŽÍVANIE VLASU HAIRMAX A VÝKLAD PODMIENOK TEJTO DOHODY SA MUSÍ RIADIŤ A VYSTAVOVAŤ V SÚLADE SO ZÁKONMI ŠTÁTU FLORIDA PLATNÉ PRE DOHODY ROKOVANÉ, VYKONÁVANÉ A VYKONÁVANÉ V CELKU A JEDNOTE V RÁMCI ŠTÁTU FLORIDA. ZMLUVNÉ STRANY SÚHLASIA, ŽE ŠTÁT KONFLIKTOV PRÁVNÝCH PREDPISOV ŠTÁTU FLORIDY SA NA TÚTO DOHODU NEPLATÍ ALEBO NA ŽIADNU TRANSAKCIU VYKONANÚ TÚTO DOHODOU.

JURISDIKCIA A MIESTO: ZMLUVNÉ STRANY NEPREDVOLITELNE PREDKLADAJÚ A SOUHLAS S JEDINOU A VÝHRADNOU JURISDIKCIOU A MIESTOM ŠTÁTOV NA FLORIDE VO VOĽNÝCH PLÁTOCH, FLORIDÁCH, USA A SPOLKOVÝCH SÚDOCH NA JUŽNÝCH OKOLOCH NEZVYŠOVAŤ OBRANU FÓRA NEDOPORUČENÝCH.

AUTORIZOVANÝ ZÁSTUPCA V EURÓPE (IBA REGULAČNÉ VECI): EMERGO EUROPE, PRINSESSEGRACHT 20, 2514 AP HAAG, HOLANDSKO. TEL: +31 (0) 70-345-8570 FAX: +31 70-345-7299

Na potvrdenie platnosti záruky sa zaregistrujte online na stránke [www.hairmax.com/warranty](http://www.hairmax.com/warranty)



## ZÁRUKA

HairMax má dvojročnú záruku na chyby materiálu alebo spracovania od spoločnosti Lexington International, LLC. Na položky, ktoré sú poškodené alebo zneužívané, sa záruka nevzťahuje a budú účtované podľa sadzieb bežných opráv. Akýkoľvek pokus o samoobslužný servis vášho prístroja, pokiaľ nebude vydaný pokyn spoločnosťou HAIRMAX CUSTOMER SERVICE, bude mať za následok stratu platnosti záruky. Kompletne záručné podmienky nájdete v používateľskej príručke.

Na potvrdenie platnosti záruky sa  
zaregistrujte online na adrese  
[www.hairmax.com/warranty](http://www.hairmax.com/warranty)

Ak nemáte počítač, môžete sa zaregistrovať telefonicky na nasledujúcich číslach:

**Direct line** +1 561-417-0200

**United States and Canada** 1-866-527-3726

**United Kingdom** 0808-134-9868

**Australia** 1-800-937-358

Monday - Friday 9 AM - 5 PM ET





# HAIRMAX<sup>®</sup>

The science of hair growth.<sup>®</sup>

## Corporate Office – Customer Service – Warranty Repairs

Lexington Intl., LLC  
1040 Holland Drive  
Boca Raton, Florida 33487 USA

Direct line +1 561-417-0200

United States and Canada 1-866-527-3726

United Kingdom 0808-134-9868

Australia 1-800-937-358

Monday - Friday 9 AM - 5 PM ET

## Authorized Representative in Europe (Regulatory Affairs Only):



Tel: +31 (0) 70 345-8570 Fax: +31 70 346-7299

## Australian Sponsor: Emergo Australia

Level 20, Tower II Darling Park, 201 Sussex Street  
Sydney, NSW 2000 Australia