



**HAIRMAX®**  
The science of hair growth.®

HairMax®

LaserBand 41  
comfortflex

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

## Čo by ste mali vedieť skôr, než začnete

Úvod . . . . .	1
Pre koho je určený? (Klasifikácia muž/žena) . . . . .	2
Pre aký typ pleti je určený ? (Fitzpatrick Typ pleti) . . . . .	3
Upozornenia a varovania . . . . .	4
Riziká/Symboly/Testovanie citlivosti . . . . .	5
Ako monitorovať aktivitu zariadenia . . . . .	6
Režim zlyhania zariadenia . . . . .	6
Životnosť zariadenia . . . . .	6
Súhrn klinickej štúdie u mužov . . . . .	7
Súhrn klinickej štúdie u žien . . . . .	8

## HairMax LaserBand

Prehľad zariadenia . . . . .	9
Začíname . . . . .	10
Možnosti nabíjania . . . . .	10
Správne použitie . . . . .	11
Manipulácia so zariadením . . . . .	11
Obsah balenia . . . . .	13
Riešenie problémov . . . . .	14

## Ďalšie užitočné informácie

Bezpečnostný štítok . . . . .	15
Laserové parametre . . . . .	15
Podmienky použitia . . . . .	15

Ppecifikácie napájacieho zdroja . . . . .	15
Pokyny na údržbu/čistenie . . . . .	16
Elektrická bezpečnosť . . . . .	17
Pokyny pre elektromagnetické emisie . . . . .	18
Elektromagnetická imunita . . . . .	19
Odporúčania týkajúce sa elektromagnetickej vzdialenosti . . . . .	21
Záruka . . . . .	22

## Corporate Office – Customer Service – Warranty Repairs

Lexington Intl., LLC  
1040 Holland Drive  
Boca Raton, Florida 33487 USA

Email: [info@hairmax.com](mailto:info@hairmax.com)  
[www.HairMax.com](http://www.HairMax.com)

Direct line +1 561-417-0200

United States and Canada 1-866-527-3726

United Kingdom 0808-134-9868 Australia  
1-800-937-358

Monday - Friday 9 AM - 5 PM ET

Pre viac informácií o používaní, kvalite a bezpečnosti nájdete na stránke:

[www.hairmax.com/videos](http://www.hairmax.com/videos) and [Hairmax.com/QualitySafety](http://Hairmax.com/QualitySafety)

©Copyright 2019 Lexington Intl., LLC. All rights reserved.

## Predstavenie HairMax®

Váš HairMax je domáce laserové zariadenie, ktoré je klinicky overené na liečbu dedičného vypadávania vlasov u mužov a žien. HairMax je voľne predajný prístroj, ktorý je možné predat' priamo verejnosti.


## Indikácie

Modely HairMax sú určené na liečbu androgénnej alopecie a na podporu rastu vlasov u žien, ktoré majú Ludwig (Savin) I-4, II-1, II-2 alebo čelné vzorce vypadávania vlasov, a u mužov, ktorí majú Norwood Hamilton Classifications IIa až V a ktorí majú Fitzpatrick typy pleti I až IV.

## Ako HairMax funguje

HairMax funguje tak, že poskytuje laserovú energiu na stimuláciu vlasových folikulov. Pre dosiahnutie optimálnych výsledkov nesmie byť laser blokovaný vlasmi a musí mať prístupnú cestu k pokožke hlavy.

HairMax má zúbky, ktoré rozdeľujú vlasy a umožňujú maximálnemu množstvu laserovej energie preniknúť ku pokožke hlavy.

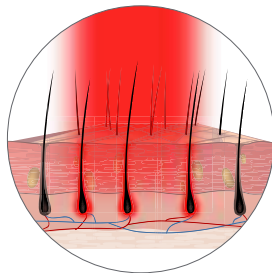

## Ošetrovanie pomocou HairMax

HairMax by sa mal používať 3-krát týždenne s rozstupom každý druhý deň. Napríklad pondelok, streda, piatok. HairMax by sa nemal používať viac, ako je odporúčaná doba liečby denne. Klinické štúdie dokazujú, že používatelia vidia zmeny už za 16 týždňov.

## Výhody HairMax

Klinická štúdia sa uskutočňovala u mužov a žien počas šesťmesačného obdobia. Štúdia ukázala, že u 90% mužov a žien sa zvýšil počet vlasov.

Podrobné výsledky štúdie sú uvedené na stranách 7- 8.

Pred použitím prístroja HairMax je dôležité prečítať si tento návod na použitie a porozumieť mu.

# PRE KOHO JE HAIRMAX® URČENÝ?


Ako zistíte, či je pre vás HairMax vhodný?

HairMax môžu používať muži a ženy s rednúcimi vlasmi (vrátane vlasov ošetrovaných farbou) alebo so plešatosťou spôsobenou dedičným stavom. Na opísanie stupňa vypadávania vlasov používajú lekári systém známy ako Norwood Hamiltonova klasifikácia (muži) a Ludwig-Savinova klasifikácia (ženy). Nižšie sú uvedené obrázky jednotlivých škál. Tieňované oblasti zobrazujú typ vypadávania vlasov, ktorý je možné liečiť HairMaxom.

Norwood Hamilton  
klasifikácia - Muži



Ludwig-Savin  
Klasifikácia - Ženy

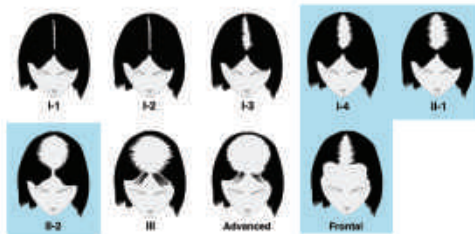

HairMax nebol testovaný na vypadávanie vlasov mimo tieňovaných oblastí

# PRE KOHO JE HAIRMAX® URČENÝ?

HairMax bol študovaný od svetlých až po hnedé tóny pleti (typy 1,2,3,4), ako je opísané v nasledujúcej stupnici Fitzpatrick. Neznamená to, že zariadenie nebude pracovať na najtmavších tónoch pleti. Z dôvodu obmedzení digitálnej fotografie a softvéru na počítania vlasov sa nám to nepodarilo otestovať na tmavých typoch pokožky.

**Sprievodca klasifikáciou typu pokožky Fitzpatrick:** Spôsob, ako opísať typ pleti na základe jej komplexnosti a toho, čo sa s ňou stane pri slnečnom svetle.

Typ 1	Klinicky testované na týchto typoch pleti	Veľmi biela alebo pehavá pokožka, vždy spálená pri slnečnom žiarení (veľmi biela, často sa vyskytuje u ľudí s ryšavými alebo blond vlasmi a modrými očami).
Typ 2		Biela pokožka, zvyčajne spálená pri slnečnom žiarení (biela; často u ľudí s červenými alebo blond vlasmi a modrými, zelenými alebo orieškovými očami).
Typ 3		Biely alebo olivový odtieň pleti, niekedy spálený pri slnečnom žiarení (biela; viditeľný u ľudí s akoukoľvek farbou vlasov alebo očí.)
Typ 4		Hnedá pokožka, popáleniny zriedka pri slnečnom žiarení (bežné u ľudí stredomorského pôvodu)
Typ 5	Klinicky netestované na týchto typoch pleti	Tmavohnedá pokožka, veľmi zriedka popálená slnečným žiarením (bežné u ľudí stredovýchodného pôvodu).
Typ 6		Čierna pokožka, popáleniny zriedka pôsobením slnka

Upravené z Fitzpatrickovej dermatológie vo všeobecnom lekárstve. McGraw-Hill Professional; 5. vydanie.

Upozorňujeme, že HairMax bol testovaný iba na svetlých až hnedých tónoch pleti. To neznamená, že nebude fungovať na tmavších tónoch pleti.

# UPOZORNENIA A VAROVANIA

## UPOZORNENIA

- ⚠ Nedívejte sa priamo na červené laserové svetlo alebo jeho odraz v zrkadle, pretože by to mohlo dočasne podráždiť oči. Ak pozeráte na svetlo príliš dlho, mohlo by to poškodiť vaše oči. Nikdy nepoužívajte zväčšovacie sklo, keď používate HairMax, pretože by to mohlo spôsobiť dočasné podráždenie vašich očí.
- ⚠ Uchovávajte HairMax mimo dosahu detí a domácich miláčikov.
- ⚠ Nepúšťajte HairMax do vody, pretože by ste mohli zasiahnuť elektrický prúd. Ak dôjde k poškodeniu vášho HairMaxu vodou, kontaktujte bezplatný zákaznícky servis na nižšie uvedených číslach.
- ⚠ Ak je kábel poškodený na vašom prístroji HairMax, zariadenie nepoužívajte, pretože by mohlo dôjsť k zásahu elektrickým prúdom. Ak sa kábel poškodí, obráťte sa na bezplatné zákaznícke služby na telefónnom čísle uvedenom nižšie.
- ⚠ Nepoužívajte HairMax v blízkosti vyhrievaných povrchov, pretože by to mohlo spôsobiť nefunkčnosť zariadenia a môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom. Bezplatne kontaktujte zákaznícky servis na nižšie uvedených číslach
- ⚠ Nevystavujte sa priamemu laserovému svetlu
- ⚠ Toto je neškodné zariadenie citlivé na nízku úroveň ESD (elektrostatický výboj). Nedotýkajte sa nabíjajúcich kontaktov ani portu USB. (pozri stranu 9). Dotknutie sa kontaktov alebo USB portu nie je zásadným výkonom a nespôsobí základné bezpečnostné problémy. Ak dotyk s kontaktmi alebo portom USB spôsobí poruchu zariadenia, resetujte ho vypnutím a opätovným zapnutím.
- ⚠ Úpravy tohto zariadenia nie sú povolené.
- ⚠ Toto zariadenie nemá žiadne časti opraviteľné používateľom. Nepokúšajte sa toto zariadenie upravovať alebo opravovať.
- ⚠ Pokiaľ je zariadenie v prevádzke, nepokúšajte sa ho upravovať alebo opravovať.
- ⚠ Ak je toto zariadenie upravené, musia sa vykonať príslušné kontroly a skúšky, aby sa zabezpečilo ďalšie bezpečné používanie. Bezplatne kontaktujte zákaznícky servis HairMax na nižšie uvedených číslach.

## POZOR

- ⚠ Ak užívate akékoľvek lieky alebo výrobky, ktoré spôsobujú citlivosť na svetlo, mali by ste si HairMax otestovať, aby ste sa uistili, že nemáte žiadnu reakciu. Niektoré z vecí, ktoré môžu spôsobiť zvýšenú citlivosť na váš HairMax, môžu byť lieky na prechladnutie, alergie, lieky proti bolesti a lieky na liečbu infekcií. Ak chcete otestovať citlivosť HairMaxu, zapnite prístroj, držte ho na jednom mieste a svieťte svetlom na predlaktie. Po dvoch minútach prístroj vypnite a odložte nabok. Pozeraajte sa na miesto, kde ste držali laserové svetlo počas nasledujúcich päť minút. Ak spozorujete akúkoľvek reakciu, ako je začervenanie alebo vyrážka, nepoužívajte svoj HairMax a obráťte sa na náš bezplatný zákaznícky servis na nižšie uvedených číslach, kde nájdete informácie o tom, ako vrátiť váš produkt a získať vrátenie peňazí.
- ⚠ Používajte svoj HairMax iba podľa pokynov. Nepokúšajte sa meniť spôsob fungovania vášho HairMaxu. Iné úpravy ovládacích prvkov, úprav, výkonu alebo postupov, ako sú tu uvedené, môžu mať za následok vystavenie nebezpečnému žiareniu (laseru). Bezplatne kontaktujte zákaznícky servis na nižšie uvedených číslach.
- ⚠ Nikdy nepoužívajte na žiadnu časť svojho HairMaxu acetón ani iné rozpúšťadlá. Použitie rozpúšťadiel na okne môže blokovat' priechod laserového svetla.

United States and Canada 1-866-527-3726

United Kingdom 0808-134-9868

Australia 1-800-937-358

## Riziká

HairMax® bol klinicky testovaný na mužoch aj ženách. V klinickej štúdii pre mužov 5% mužov uviedlo, že pri používaní HairMaxu mali svrbenie alebo mravčenie. Žiadna zo žien v klinickej štúdii neuviedla žiadny z týchto vedľajších účinkov. Ak máte svrbenie, brnenie alebo akýkoľvek iný vedľajší účinok, ktorý vás obťažuje, prestaňte používať svoj HairMax a kontaktujte zákaznický servis spoločnosti Lexington bezplatne na číslach uvedených nižšie.

## Symboly

CE Európska zhoda

WEEE

! Výstraha

! Pozor

Laser

Laserové varovanie

↑ Laser Aperture ↑ Indikácia clony laserom

Laserový varovný štítok

ⓘ Zapnutie/ vypnutie

Prečítajte si návod na obsluhu

RF irušenie

Aplikovaná časť typu BF


SN Sériové číslo

IP22 Stupeň odolnosti proti vlhkosti

ESD nízkej úrovne

## Testovanie citlivosti

Pred začatím liečby nezabudnite vyskúšať citlivosť HairMaxu. Urobte test citlivosti na pokožku na akúkoľvek reakciu na svetelnú terapiu. Uistite sa, že je váš HairMax úplne nabitý (pozri stranu 10). Zapnite zariadenie stlačením vypínača jedenkrát. Predlaktie umiestnite do blízkosti laserov, až kým sa laseru zapne senzor priblíženia. Predlaktie držte na svetle 2 minúty. Vypnite svoj HairMax a odložte ho nabok.

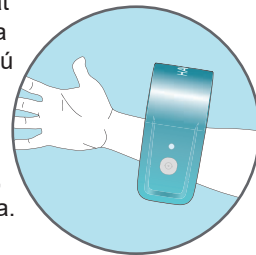

Ak sa u vás neobjaví žiadna reakcia, pokračujte v liečbe podľa pokynov na strane 11. Ak spozorujete akúkoľvek reakciu, ako je začervenanie alebo vyrážka, nepoužívajte HairMax. Bezplatne kontaktujte zákaznický servis na nižšie uvedených číslach alebo v mieste nákupu.

United States and Canada 1-866-527-3726

United Kingdom 0808-134-9868

Australia 1-800-937-358

# MONITOROVANIE ZARIADENIA | REŽIM ZLYHANIA | ŽIVOTNOSŤ ZARIADENIA

## Monitorovanie zariadenia

Váš HairMax bol počas výroby starostlivo kontrolovaný a testovaný. Pri správnej funkcii sa kontrolka na prístroji rozsvieti. Cez okno v spodnej časti zariadenia svieti červené laserové svetlo.

NEPOZERAJTE sa priamo na laserové svetlo. Posviette si laserovým svetlom na dlaň a skontrolujte, či sa rozsvieti červené laserové svetlo.

Ak kontrolka zariadenia nesvieti alebo ak sa laserové svetlo nerozsvieti, kontaktujte bezplatný zákaznícky servis na číslach uvedených nižšie.

## Režim zlyhania zariadenia

Váš HairMax je navrhnutý tak, aby vydržal mnoho rokov pravidelného používania. Laserové svetlo časom nevybledne ani sa jeho kvalita neznižuje. Na konci životnosti lasera alebo pri zlyhaní z akéhokoľvek iného dôvodu, červené laserové svetlo už nebude svietiť.

## Životnosť zariadenia

HairMax je zdravotnícka pomôcka vyrobená pod prísnou kontrolou kvality a validovaná prostredníctvom GMP (Good Manufacturing Practices).

HairMax obsahuje vysoko kvalitné laserové diódy určené pre optimálny výkon.

Na základe tohto hodnotenia a životnosti použitých komponentov je váš HairMax navrhnutý tak, aby vydržal mnoho rokov pravidelného používania. Pred použitím prístroja HairMax si prosím prečítajte celý tento návod na obsluhu.

United States and Canada 1-866-527-3726

United Kingdom 0808-134-9868

Australia 1-800-937-358



# KLINICKÁ ŠTÚDIA U MUŽOV

Klinické štúdie sa uskutočňovali na viacerých miestach v USA. Účastníkmi štúdie boli muži so svetlým až hnedým typom pleti a s diagnostikovanou androgénnou alopeciou, ktorá zahŕňa dedičné vypadávanie vlasov. Subjekty boli rozdelené do dvoch skupín, HairMax skupina a kontrolná skupina. Ovládacie zariadenie vyzeralo a znelo ako zariadenie HairMax, neobsahovalo však laserové svetlo. Klinické štúdie dodržiavali všetky smernice GCP (Good Clinical Practice), boli schválené IRB (Institutional Review Board) a uvedené na [www.clinicaltrials.gov](http://www.clinicaltrials.gov).

Počas 6-mesačnej klinickej štúdie si subjekty ošetrovali vlasy jedenkrát denne, trikrát týždenne v každý druhý deň. Počet hrubých, normálnych zdravých chlpkov v cieľovej zóne sa počítal v 1. týždni, 16. týždni a 26. týždni.

Výsledky 26-týždňovej liečby ukázali, že u viac ako 90% mužov došlo k zvýšeniu počtu vlasov. \*


Subjekty v štúdiu nezaznamenali žiadne závažné nežiadúce účinky. Počet a typy nežiadúcich účinkov boli v skutočnosti podobné v skupine HairMax aj v kontrolnej skupine.

## Zmena rastu vlasov

V klinickej štúdiu sa po 26 týždňoch liečby prístrojmi HairMax oproti kontrolnému prístroju zistilo zvýšenie počtu vlasov, ktoré môžete vidieť v grafe. →

\* Na základe minimálne 5 nových vlasov na centimeter štvorcový / 32 nových vlasov na palec štvorcový, ktoré boli pozorované pri následnej návšteve

Mean Terminal Hair Count Changes  
From Baseline in **MALES**  
26 Weeks, Observed Hair Count

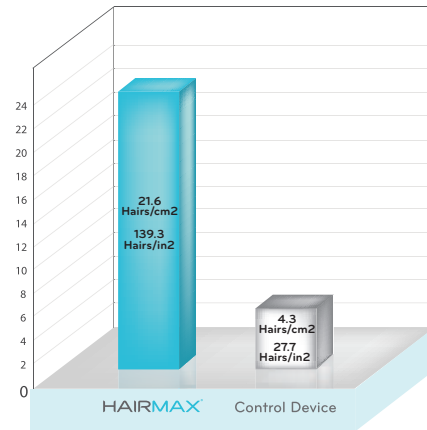

# KLINICKÁ ŠTÚDIA U ŽIEN

Klinické štúdie sa uskutočňovali na viacerých miestach v USA. Účastníkmi štúdie boli ženy so svetlým až hnedým typom pleti a s diagnostikovanou androgénnou alopeciou, ktorá zahŕňa dedičné vypadávanie vlasov. Subjekty boli rozdelené do dvoch skupín, HairMax skupina a kontrolná skupina. Ovládacie zariadenie vyzeralo rovnako ako zariadenie HairMax, neobsahovalo však laserové svetlo. Klinické štúdie dodržiavali všetky smernice GCP (Good Clinical Practice), boli schválené IRB (Institutional Review Board) a uvedené na [www.clinicaltrials.gov](http://www.clinicaltrials.gov).

Počas 6-mesačnej klinickej štúdie si subjekty ošetrovali vlasy jedenkrát denne, trikrát týždenne v každý druhý deň. Počet hrubých, normálnych zdravých chĺpkov v cieľovej zóne sa počítal v 1. týždni, 16. týždni a 26. týždni.

Výsledky v 26. týždni ukázali, že viac ako 90% žien zaznamenalo nárast počtu vlasov. \*


Subjekty v štúdiu nezaznamenali žiadne závažné nežiaduce účinky. V skutočnosti počet a typy nežiaducich účinkov boli podobné v skupine HairMax aj v kontrolnej skupine.

## Zmena rastu vlasov

V klinickej štúdiu sa po 26 týždňoch liečby prístrojmi HairMax oproti kontrolnému prístroju zistilo zvýšenie počtu vlasov, ktoré môžete vidieť v grafe.


\* Na základe minimálne 5 nových vlasov na centimeter štvorcový / 32 nových vlasov na palec štvorcový, ktoré boli pozorované pri následnej návšteve.

Mean Terminal Hair Count Changes  
From Baseline in **FEMALES**  
26 Weeks, Observed Hair Count

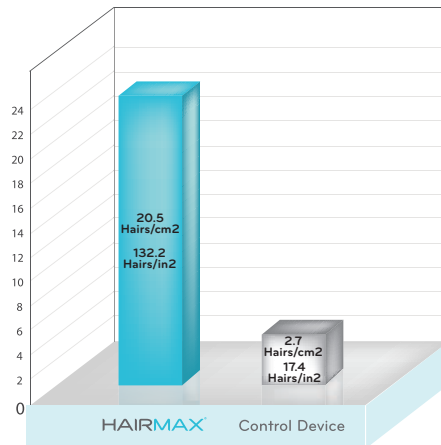

# PREHĽAD ZARIADENIA

- A TLAČIDLO NAPÁJANIA
- B SVETELNÝ INDIKÁTOR
-  C NAPÁJACÍ KÁBEL
- D ZÚBKY
- E LASEROVÉ OKNO
- F SÉRIOVÉ ČÍSLO
- G VAROVNÝ ŠTÍTOK
- H NABÍJAČKA/STOJAN
-  I USB NABÍJACÍ PORT
- J INDIKÁTOR SVETLA NA STOJANE
- K USB NABÍJACÍ PORT NA STOJANE
-  L NABÍJACIE KÁBLE
- M SENZOR VZDIALENOSTI

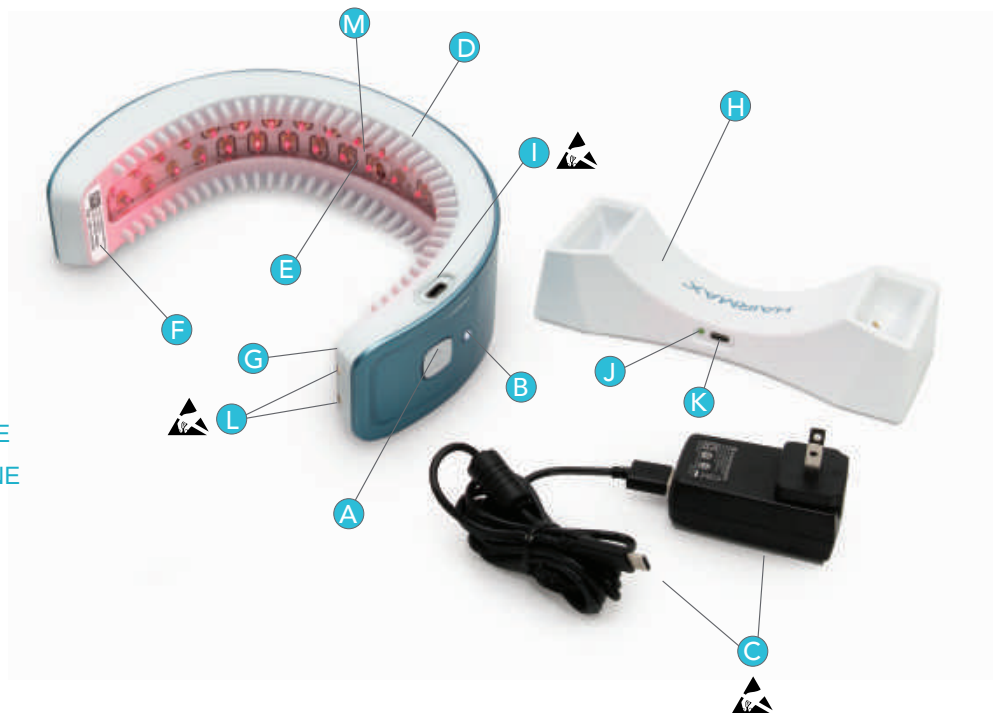

# ZAČÍNAME I MOŽNOSTI NABÍJANIA

Váš LaserBand a vyrába s trvalo nainštalovanou nabíjateľnou batériou. Predtým, ako začnete používať váš HairMax, prečítajte si celú túto používateľskú príručku. Pokyny pre toto zariadenie sú určené pre jednotlivcov od 15 rokov. HairMax je bezpečný pre domáce použitie.



Použitie HairMax LaserBand trvá len 3 minút. Absolvujte tri ošetrenia do týždňa. Liečba by mala byť rozložená na každý druhý deň. Napríklad: Pondelok, Streda a Piatok.

Väčšina používateľov vidí výsledky už za 16 týždňov (na základe klinických štúdií).


Keď dostanete HairMax, vyberte všetky časti z puzdra. Pred prvým použitím musíte svoj HairMax nabíjať 4-6 hodín.

Nepoužívajte svoj HairMax, keď je zapojený do napájacieho kábla.

## Možnosti nabíjania

### MOŽNOSŤ 1

Nabíte si svoj HairMax pomocou nabíjacieho stojana a napájacieho kábla. Pred vložením HairMaxu na nabíjací podstavec, uistite sa, HairMax vypnutý. Zapojte napájací kábel do nabíjacieho stojana a druhý koniec do elektrickej zásuvky. Na bočnej strane nabíjacieho stojana sa rozsvieti zelené svetlo, ktoré označuje, že napájací kábel funguje správne. Položte svoj HairMax na nabíjací stojan. Počas nabíjania bude blikať kontrolka prístroja. Stále svetlo označuje, že je váš HairMax úplne nabitý.

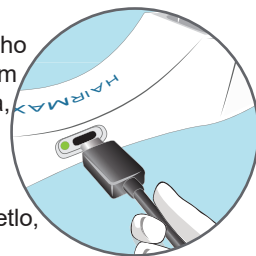


Najlepšie výsledky dosiahnete, keď po každom použití batériu nabijete.

**DÔLEŽITÉ:** Pri vkladaní konektora napájacieho kábla do prístroja alebo do stojana, musí byť pre správne nabitie úplne zasunutý. Budete počuť kliknutie, ktoré naznačuje, že konektor je úplne zasunutý.

**MOŇNOST 2** Nabíte si svoj HairMax vložením napájacieho kábla priamo do nabíjacej zásuvky na ľavej dolnej strane prístroja a druhým koncom do elektrickej zásuvky

Počas nabíjania bude blikať kontrolka prístroja. Stále svetlo označuje, že je váš HairMax úplne nabitý.

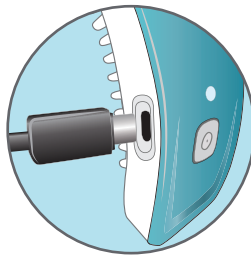

**POČAS POUŽÍVANIA** Biele svetlo zariadenia blinká pomaly, čo naznačuje plne nabitú batériu. Keď je batéria takmer vybitá a je potrebné ju opäť nabiť, kontrolka začne rýchlo blikať. Keď sa batéria úplne vybije, zariadenie vibruje 3 rýchlymi impulzmi a lasery sa vypnú. Ak sa to stane, nabite svoj HairMax, ako je popísané vyššie.

## Správne použitie

Pred ošetrením si otestujte citlivosť HairMaxu (pozri stranu 5 používateľskej príručky). Váš HairMax by sa mal používať iba 3 minúty trikrát týždenne. Procedúry by mali byť rozmiestnené každý druhý deň (napríklad pondelok, streda, piatok).


Na začiatku liečby zapnite HairMax stlačením vypínača.

## Pokyny počas liečby

Z bezpečnostných dôvodov vaše zariadenie HairMax obsahuje senzor priblíženia. Lasery sa **NEZAPNÚ**, pokiaľ prístroj nebudete mať položený na hlave alebo ak doň nevrložíte ruku, aby ste otestovali citlivosť laseru (Strana 5).


Váš HairMax sa používa v 6 líniah na pokožke hlavy. Pre každú líniu ho nechajte na mieste minimálne 30 sekúnd. Vibrovať bude každých 30 sekúnd, aby ste vedeli, kedy ju máte presunúť do na ďalšiu oblasť.

Na zahájenie liečby stlačte jedenkrát vypínač. Lasery sa nezapnú, kým nebudú umiestnené na hlave. Ďalej ho umiestnite na líniu čelných vlasov. Toto je poloha č. 1. Keď ucítite vibrácie, posuňte ich dozadu asi o 5 cm do polohy č. 2. Ponechajte ich v polohe 2, kým znova neucítite vibrácie.

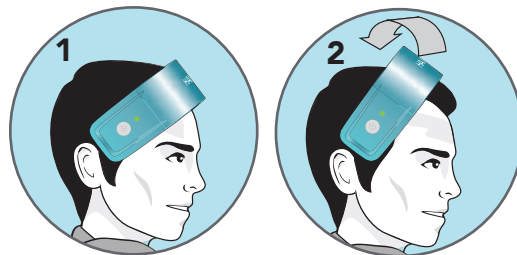

# POKYNY POČAS LIEČBY

Tento postup opakujte pre všetkých šesť pozícií na pokožke hlavy. Celé ošetrenie by malo trvať minimálne 3 minúty.

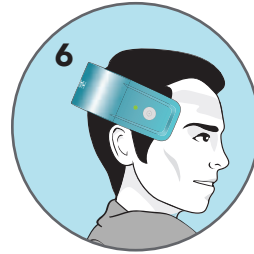

Po ošetrení vypnite HairMax jedným stlačením vypínača. Vezmite si HairMax z hlavy a položte ho na nabíjací stojan pre ďalšie použitie.

Váš HairMax sa automaticky vypne po 12 minútach.



kížanie



zodvihnutie a nasadenie

## Please Note:

- Je dôležité, aby ste počas liečby HairMax posúvali kížavým spôsobom. Hair Max nezdvíhame z hlavy a nenasadzujeme späť. Pamätajte, že pokožku hlavy kúpete laserovým svetlom. Ak hýbete s HairMaxom príliš rýchlo, ošetrenie nedosiahne optimálne výsledky na podporu rastu vlasov.
- Čas potrebný na ošetrenie HairMaxom sú len 3 minúty.

# OBSAH BALENIA



LaserBand



Nabíjací stojan



Napájací kábel



Návod na použitie



Sprievodca rýchlym spustením

**Upozornenie:** Celá zostava LaserBand sa považuje za aplikovanú súčasť typu BF.

# RIEŠENIE PROBLÉMOV

AKÝKOL'VEK POKUS O SAMOSTATNÚ OPRAVU A NASTAVENIE ZARIADENIA OKREM SLUŽBY POUŽÍVANIA HAIRMAX NESPADÁ POD VAŠU ZÁRUKU

HairMax má pokrokovú elektroniku, ktorá zaisťuje, že zariadenie pracuje tak, ako má a dodáva správne množstvo laserovej energie.

Ak máte z nejakého dôvodu ťažkosti so zariadením, vyskúšajte jeden z nasledujúcich tipov:

**Váš HairMax nejde zapnúť:**

- Najčastejšie označuje vybitú batériu, ktorú je potrebné nabiť
- Je potrebné batériu nabiť pomocou jednej z možností nabíjania popísaných na strane 10 a uistite sa, že je vaše zariadenie úplne nabité
- Váš HairMax sa nedá zapnúť, keď je napájací kábel zapojený.

**Váš HairMax sa vypína počas používania:**

- Najčastejšie označuje vybitú batériu, ktorú je potrebné nabiť
- Je potrebné batériu nabiť pomocou jednej z možností nabíjania popísaných na strane 10 a uistite sa, že je vaše zariadenie úplne nabité
- Váš HairMax sa nedá zapnúť, keď je napájací kábel zapojený.

**Váš HairMax sa nenabíja:**

- Uistite sa, že ho nabíjate vo funkčnej elektrickej zásuvke
- Uistite sa, že napájací kábel je správne zasunutý
- Skúste zariadenie nabiť priamo, ako je popísané v MOŽNOSTI 2 na strane 10
- Skontrolujte, či je konektor napájacieho kábla vložený správne ako je popísané na strane 10

- Pomocou suchej handričky očistite nabíjacie kontakty prístroja a aj nabíjací stojan

**Váš HairMax nevibruje:**

- Pomocou jednej z možností nabíjania popísaných na strane 10 sa uistite, že je vaše zariadenie úplne nabité

**Váš HairMax vibruje, ale nevidíte laserové svetlá**

- Najčastejšie označuje vybitú batériu, ktorú je potrebné nabiť
- Je potrebné batériu nabiť pomocou jednej z možností nabíjania popísaných na strane 10 a uistite sa, že je vaše zariadenie úplne nabité
- Váš HairMax sa nedá zapnúť, keď je napájací kábel zapojený.


Corporate Office – Customer Service – Warranty Repairs Lexington  
Intl., LLC  
1040 Holland Drive  
Boca Raton, Florida 33487 USA

Direct line +1 561-417-0200

United States and Canada 1-866-527-3726 United  
Kingdom 0808-134-9868 Australia 1-800-937-358  
Monday - Friday 9 AM - 5 PM ET



VAROVNÝ ŠTÍTK I   LASEROVÉ PARAMETRE I PODMIENKY POUŽITIA	
Vlnová dĺžka	655nm +/- 10nm viditeľné červené svetlo
Výkon laseru pre kvalifikáciu	<5mW CW
Divergencia	57 mrad
Počet laserov	41
Tento laserový výrobok je počas všetkých prevádzkových postupov označený ako trieda 3R..	
Poznámky:	Laserové zariadenia HairMax neobsahujú žiadne časti opravitelne používateľom.
Umiestnenie výstražného štítku	žltý štítok
Laserové MTBF: stredná doba medzi poruchami:	10,000 hours at 25°C teplota okolia
Prevádzková teplota/nadmorská výška/atmosférický tlak /vlhkosť:	5°C to 35°C/0 to 2,000 m/80kPa to 106kPa/0% to 90%, relatívna vlhkosť
Teplota / vlhkosť / atmosférický tlak pri skladovaní a preprave:	-20°C to 60° C/0% to 90%, relatívna vlhkosť /50kPa to 106kPa
Vniknutie vody alebo pevných častíc:	IP22
Cykly nabíjania batérie	300 cyklov
ROHS: obmedzenie nebezpečných látok	300 cycles 2011/65/EU
Veľkosť a váha zariadenia	18 x 13 x 5.5 cm/243 gramov
Veľkosť a váha kolisky	18.5 x 4.5 x 7 cm/312 gramov
Záruka:	2 roky
Vek použitia	Adult

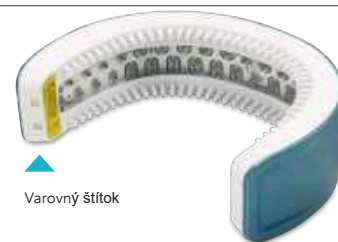

Varovný štítok



Sériové číslo



## Špecifikácie napájacieho zdroja

Fuhua UE05WCP-050100SPC alebo podobné. Výstup = 5V DC-1,0A. Plug: USB na USB micro C konektor.

Zdroj napájania pre váš HairMax je možné používať v Spojených štátoch i medzinárodne. Tento napájací zdroj sa prispôbi všetkým napájacím zdrojom od 100 V / 60 cyklov (USA) do 240 V / 50 cyklov. Ak zásuvky vo vašej krajine majú odlišné zástrčky ako napájanie dodávané s vašim HairMaxom, použite zásuvkový adaptér (nedodáva sa so zariadením).

## Údržba

HairMax je navrhnutý tak, aby vydržal mnoho rokov. Okrem pravidelného čistenia nevyžaduje žiadnu inú údržbu. Váš HairMax je určený iba na použitie v interiéroch.

### Čistenie vášho HairMax.

- Udržujte svoj HairMax čistý.
- Vypnite HairMax jedným stlačením vypínača.
- Odpojte napájací kábel zo zariadenia a z elektrickej zásuvky v stene.
- Laserové okienko čistite mäkkou mierne navlhčenou handričkou. Nepoužívajte acetón ani korozívne rozpúšťadlá. Na čistenie hrebeňových zubov jemne odstráňte všetky chlípky alebo prach pomocou mierne navlhčenej handričky.
- Nepoužívajte acetón, mydlo ani čistiace prostriedky, iba teplú vodu.

## Pokyny na likvidáciu/ recyklácia



Tento symbol na produkte alebo na jeho obale naznačuje, že tento produkt nesmie byť likvidovaný spolu s iným domovým odpadom. Namiesto toho je vaša zodpovednosťou zlikvidovať vaše odpadové zariadenie odovzdaním na určenom zbernom
















mieste na recykláciu použitých elektrických a elektronických zariadení. Triedený zber a recyklácia vášho odpadového zariadenia v čase jeho likvidácie pomôže chrániť prírodné zdroje a zaistiť ich recykláciu spôsobom, ktorý chráni ľudské zdravie a životné prostredie. Viac informácií o tom, kde môžete odovzdať svoje odpadové zariadenie na recykláciu, získate od miestneho úradu alebo od služby likvidácie

## Elektrická bezpečnosť

Pri používaní tohto alebo iného elektrického zariadenia je potrebné dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia, najmä ak sú prítomné deti.

 **POZOR:** Uchovávajte mimo dosahu vody. Kontakt s vodou môže spôsobiť elektrický šok.

### Na zníženie rizika zasiahnutia elektrickým prúdom:

-  Nepoužívajte počas kúpania.
-  Neumiestňujte ani neskladujte svoj HairMax na miestach, kde môže spadnúť do vane alebo umývadla.
-  Nevystavujte svoj HairMax tečúcej vode ani ho nehádzte do vody alebo inej tekutiny. Ak váš HairMax spadne do vody, okamžite ho vytiahnite zo zásuvky.
-  Ak používate HairMax v blízkosti vody, odporúča sa použitie elektrickej zásuvky chránenej prerušovačom zemného spojenia.
-  Nehádzte svoj HairMax do ohňa ani ho neskladujte pri vysokých teplotách vyšších ako 60 ° C.
-  Počas nabíjania nezapínajte a nepoužívajte svoj HairMax.
-  Napájanie nie je možné počas používania oddeliť. Neumiestňujte zariadenie tak, aby bolo ťažké zapojiť alebo vytiahnuť napájací kábel. Ak máte akékoľvek problémy s týmto prístrojom, napríklad s nastavením, údržbou alebo používaním, obráťte sa na zákaznícky servis.
-  Ak dôjde k neočakávanej manipulácii alebo udalosti, informujte zákaznícky servis.
  
-  Po páde / náraze, ktorý môže spôsobiť zmeny výkonu, kontaktujte zákaznícky servis.
-  Buďte opatrný, nedávajte si napájací kábel na krk, mohlo by vás to uškrtiť.
-  Uchovávajte prístroj mimo dosahu detí / domácich miláčikov, aby ste zabránili vdychnutiu alebo prehltnutiu malých častí.
-  Nepoužívajte prístroj, ak je akýmkoľvek spôsobom poškodený. Neustále používanie poškodenej jednotky môže spôsobiť zranenie, nesprávne výsledky alebo vážne nebezpečenstvo.
-  Prístroj by sa mal používať iba s príslušenstvom odporúčaným výrobcom.
-  Ak prístroj s adaptérom nepoužívate, uskladnite ho v suchej miestnosti a chráňte ho pred vlhkosťou, teplom, prachom a priamym slnečným žiarením.
-  Na odkladaciu skrinku nikdy nekladte ťažké predmety.

# NÁVOD NA ELEKTROMAGNETICKÉ EMISIE

- 1) Tento produkt vyžaduje špeciálne preventívne opatrenia týkajúce sa EMC a je potrebné ho inštalovať a uviesť do prevádzky podľa poskytnutých informácií o EMC a na túto jednotku môžu mať vplyv prenosné a mobilné vysokofrekvenčné komunikačné zariadenia.
- 2) \* V blízkosti prístroja nepoužívajte mobilný telefón ani iné zariadenia vyžarujúce elektromagnetické pole. Môže to mať za následok nesprávnu činnosť jednotky.
- 3) Upozornenie: Táto jednotka bola dôkladne testovaná a skontrolovaná, aby sa zaistil správny výkon a funkčnosť.
- 4) \* Upozornenie: tento stroj by sa nemal používať v susedstve alebo na sebe s iným vybavením a že ak je to potrebné v susednom alebo na sebe naskladanom mieste, je potrebné skontrolovať, či tento stroj overuje normálnu prevádzku v konfigurácii, v ktorej sa bude používať.

## Pokyny a vyhlásenie výrobcu - elektromagnetické emisie

LaserBand 41 je určený na použitie v elektromagnetickom prostredí špecifikovanom nižšie. Zákazník alebo užívateľ laserového pásu 41 by sa mal ubezpečiť, že sa používa v takomto prostredí.

Emisný test	Súlad	Vedenie elektromagnetického prostredia
RF emisie CISPR 11	Skupina 1	LaserBand 41 využíva RF energiu iba na svoju vnútornú funkciu. Preto sú jeho RF emisie veľmi nízke a je nepravdepodobné, že by spôsobovali akékoľvek rušenie blízkych elektronických zariadení.
RF emisie CISPR 11	Trieda B	LaserBand 41 je vhodný na použitie vo všetkých zariadeniach, vrátane domácich zariadení a zariadení priamo pripojených k verejnej nízkonapäťovej napájacej sieti, ktorá napája budovy používané na domáce účely.
Harmonické emisie IEC 61000-3-2	Trieda A	
Kolísanie napätia / zvyšovanie vyžarovania IEC 61000-3-3	Súlad	

Toto zariadenie bolo testované a bolo zistené, že vyhovuje obmedzeniam pre digitálne zariadenie triedy B v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením pri inštalácii v domácnosti. Toto zariadenie generuje, používa a môže vyžarovať vysokofrekvenčnú energiu a ak nie je nainštalované a nepoužívané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovkej komunikácie. Nie je však zaručené, že pri konkrétnej inštalácii nedôjde k rušeniu. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rádiového alebo televízneho príjmu, čo sa dá zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, odporúča sa používateľovi pokúsiť sa rušenie napraviť jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:

- Presmerujte alebo premiestnite prijímaciu anténu.
- Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Pripojte zariadenie do zásuvky v inom obvode, ako je zapojený do prijímača.
- Požiadajte o pomoc predajcu alebo skúseného rádio / TV technika.

Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam: (1) toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijateľné rušenie vrátane rušení, ktoré môže spôsobiť nežiaduce fungovanie.

# NÁVOD NA ELEKTROMAGNETICKÚ IMUNITU

## Vyhlasenie výrobcu - elektromagnetická imunita

LaserBand 41 je určený na použitie v elektromagnetickom prostredí špecifikovanom nižšie. Zákazník alebo užívateľ LaserBand 41 by sa mal ubezpečiť, že sa používa v takomto prostredí.


Skúška imunity	IEC 60601 test level	Úroveň súladu	Vedenie elektromagnetického prostredia
Elektrostatický výboj (ESD) IEC 61000-4-2	Contact: $\pm 8$ kV Air: $\pm 2$ kV, $\pm 4$ kV, $\pm 8$ kV, $\pm 15$ kV	Contact: $\pm 8$ kV Air: $\pm 2$ kV, $\pm 4$ kV, $\pm 8$ kV, $\pm 15$ kV	Podlahy by mali byť drevené, betónové alebo keramické. Ak sú podlahy pokryté syntetickým materiálom, relatívna vlhkosť vzduchu by mala byť minimálne 30%.
Elektrický rýchly prechod / zhluk IEC 61000-4-4	$\pm 2$ kV pre napájacie vedenia $\pm 1$ kV pre vstupné / výstupné vedenia	$\pm 2$ kV pre napájacie vedenia Neaplikovateľné	Kvalita napájania zo siete by mala zodpovedať typickému komerčnému alebo nemocničnemu prostrediu.
Prepätie IEC 61000-4-5	$\pm 0.5$ kV, $\pm 1$ kV line(s) to line(s) $\pm 0.5$ kV, $\pm 1$ kV, $\pm 2$ kV line(s) to earth	$\pm 0.5$ kV, $\pm 1$ kV line(s) to line(s) Not Applicable	Kvalita napájania zo siete by mala zodpovedať typickému komerčnému alebo nemocničnemu prostrediu.
Poklesy napätia, krátke prerušenia a zmeny napä- tia na vstupných vedeniach napájacieho zdroja IEC 61000-4-11	Poklesy napätia: 0% UT; 0,5 cyklu 0% UT; 1 cyklus 70% UT; 25/30 cyklov Prerušenia napätia: 0% UT; 250/300 cyklus	Poklesy napätia: 0% UT; 0,5 cyklu 0% UT; 1 cyklus 70% UT; 25/30 cyklov Prerušenia napätia: 0% UT; 250/300 cyklus	Kvalita napájania zo siete by mala zodpovedať typickému komerčnému alebo nemocničnemu prostrediu. Ak užívateľ LaserBandu 41 vyžaduje nepretržitú prevádzku počas prerušenia napájania, odporúča sa napájať LaserBand 41 z neprerušiteľného zdroja napájania alebo z batérie.
Sieťová frekvencia (50 Hz / 60 Hz) magnetická pole IEC	30 A/m 50 Hz or 60 Hz	30 A/m 50 Hz	Výkonové frekvenčné magnetické pole LaserBand 41 by mali byť na úrovniach charakteristických pre typické miesta v typickom prostredí domácej zdravotnej starostlivosti.

POZNÁMKA UT je a.c. sieťové napätie pred aplikáciou testovacej úrovne.

# NÁVOD NA ELEKTROMAGNETICKÚ IMUNITU

## Vyhlásenie výrobcu - elektromagnetická imunita

LaserBand 41 je určený na použitie v elektromagnetickom prostredí špecifikovanom nižšie. Zákazník alebo užívateľ laserového pásu 41 by sa mal ubezpečiť, že sa používa v takomto prostredí.

Test imunity	IEC 60601 test level	Level súladu	Vedenie elektromagnetického prostredia
Vedené RF IEC 61000-4-6	3 Vrms 0,15 MHz - 80 MHz 6 Vrms v ISM a amatérskych rádiových pásmach od 0,15 MHz do 80 MHz	3 Vrms 0,15 MHz - 80 MHz 6 Vrms v ISM a amatérskych rádiových pásmach od 0,15 MHz do 80 MHz	<p>Prenosné a mobilné vysokofrekvenčné komunikačné zariadenia by sa nemali používať najbližšie k ktorejkoľvek časti LaserBand 41 vrátane káblov, ako je odporúčaná separačná vzdialenosť vypočítaná z rovnice platnej pre frekvenciu vysielača.</p> <p>Odporúčaná rozstupová vzdialenosť:</p> $d = 1,2 \sqrt{P}$ $d = 1,2 \sqrt{P} \text{ 80 MHz až 800 MHz}$ $d = 2,3 \sqrt{P} \text{ 800 MHz až 2,7 GHz}$ <p>Kde P je maximálny výstupný výkon vysielača vo wattoch (W) podľa výrobcu vysielača ad je odporúčaná rozstupová vzdialenosť v metroch (m). V blízkosti zariadenia označeného týmto symbolom sa môže rušiť.</p> 
Vyžarované RF IEC	80% AM pri 1 kHz	80% AM pri 1 kHz	
	10 V / m 80 MHz až 2,7 GHz, 80% AM pri 1 kHz	10 V / m 80 MHz až 2,7 GHz, 80% AM pri 1 kHz	

POZNÁMKA 1 Pri frekvenciách 80 MHz a 800 MHz platí vyšší frekvenčný rozsah.

POZNÁMKA 2 Tieto pokyny nemusia platiť vo všetkých situáciách. Šírenie elektromagnetického žiarenia je ovplyvnené absorpciou a odrazom od štruktúr, predmetov a osôb.

# NÁVOD NA ELEKTROMAGNETICKÚ IMUNITU

## Vyhlasenie výrobcu - elektromagnetická imunita

### Vyskúšajte špecifikáciu IMUNITY PRÍSTAVU PRÍSTUPU k bezdrôtovým komunikačným zariadeniam

LaserBand 41 je určený na použitie v elektromagnetickom prostredí (pre domácu zdravotnú starostlivosť), ktoré je uvedené nižšie. Zákazník alebo užívateľ LaserBand 41 by sa mal ubezpečiť, že sa používa v takomto prostredí.

Test frekvencie (MHZ)	Skupina a) (MHZ)	Servis a)	Modulácia b)	Maximum power (W)	Distance (m)	IMMUNITY TEST LEVEL (m)	Compliance LEVEL (V/m) (for home healthcare)
385	380-390	TETRA 400	Pulse modulation b) 18 Hz	1.8	0.3	27	27
450	430-470	GMRS 460, FRS 460	FM c) ± 5 kHz deviation 1 kHzine	2	0.3	28	28
710 745 780	704-787	LTE Band 13, 17	Pulse modulation b) 217 Hz	0.2	0.3	9	9
810 870 930	800-960	GMS 800/900, TETRA 800, IDEN 820, CDMA 850, LTE Band 5	Pulse modulation b) 18 Hz	2	0.3	28	28
1720 1845 1970	1700- 1900	GMS 1800; CDMA 1900; GSM 1900; DECT; LTE Band 1,3, 4, 25; UMTS	Pulse modulation b) 217 Hz	2	0.3	28	28
2450	2400-2570	Bluetooth, WLAN, 802.11 b/g/n, RFID 2450, LTE Band 7	Pulse modulation b) 217 Hz	2	0.3	28	28
5240 5500 5785	5100-5800	WLAN 802, 11 a/n	Pulse modulation b) 217 Hz	0.2	0.3	9	9

POZNÁMKA Ak je to potrebné na dosiahnutie ÚROVNE SKÚŠKY IMUNITY, vzdialenosť medzi vysielačou anténou a ME ZARIADENÍM alebo ME SYSTÉMOM sa môže znížiť na 1 m.

Skúšobná vzdialenosť 1 m je povolená normou IEC 61000-4-3.

a) Pre niektoré služby sú zahrnuté iba uplinkové frekvencie.

b) Nosná frekvencia musí byť modulovaná pomocou 50% signálu obdĺžnikového pracovného cyklu.

c) Ako alternatívu k FM modulácii je možné použiť 50% pulznú moduláciu pri 18 Hz, pretože aj keď to nepredstavuje skutočnú moduláciu, bol by to najhorší prípad.

# ODPORÚČANIA PRE ELEKTROMAGNETICKÚ VZDIALENOSŤ

Odporúčané separačné vzdialenosti medzi prenosným a mobilným vysokofrekvenčným komunikačným zariadením a laserovým pásmom 41.

LaserBand 41 je určený na použitie v elektromagnetickom prostredí (pre domácu zdravotnú starostlivosť), v ktorom sú riadené vyžarované vysokofrekvenčné rušenia. Zákazník alebo užívateľ LaserBand 41 môže pomôcť zabrániť elektromagnetickému rušeniu udržaním minimálnej vzdialenosti medzi prenosným a mobilným vysokofrekvenčným komunikačným zariadením (vysielačom) a LaserBand 41, ako sa odporúča nižšie, v súlade s maximálnym výstupným výkonom komunikačného zariadenia.

Menovitý maximálny výstupný výkon vysielača (W)	Separačná vzdialenosť podľa frekvencie vysielacza (m)		
	150 kHz to 80 MHz $d = 1,2\sqrt{P}$	80 MHz to 800 MHz $d = 1,2\sqrt{P}$	800 MHz to 2.5 GHz $d = 2,3\sqrt{P}$
0.01	0.12	0.12	0.23
0.1	0.38	0.38	0.73
1	1.2	1.2	2.3
10	3.8	3.8	7.3
100	12	12	23

Pre vysielache s maximálnym výstupným výkonom, ktorý nie je uvedený vyššie, možno odporúčanú vzdialenosť  $d$  v metroch (m) odhadnúť pomocou rovnice platnej pre frekvenciu vysielacza, kde  $P$  je maximálny výstupný výkon vysielacza vo wattoch (W) podľa výrobcu vysielacza.

POZNÁMKA 1 Pri 80 MHz a 800 MHz platí separačná vzdialenosť pre vyšší frekvenčný rozsah.

POZNÁMKA 2 Tieto pokyny nemusia platiť vo všetkých situáciách. Šírenie elektromagnetického žiarenia je ovplyvnené absorpciou a odrazom od štruktúr, predmetov a osôb.



# ZÁRUKA

HairMax má dvojročnú záruku na chyby materiálu alebo spracovania od spoločnosti Lexington International, LLC. Na položky, ktoré sú poškodené alebo zneužívané, sa záruka nevzťahuje a budú účtované podľa sadzieb bežných opráv. Akýkoľvek pokus o samoobslužný servis vášho prístroja, pokiaľ nebude vydaný pokyn spoločnosťou HAIRMAX CUSTOMER SERVICE, bude mať za následok stratu platnosti záruky.

Na potvrdenie platnosti záruky sa zaregistrujte  
online na adrese [www.hairmax.com/warranty](http://www.hairmax.com/warranty)

Ak nemáte počítač, môžete sa zaregistrovať telefonicky na nasledujúcich číslach:

**Direct line** +1 561-417-0200

**United States and Canada** 1-866-527-3726

**United Kingdom** 0808-134-9868

**Australia** 1-800-937-358

Monday - Friday 9 AM - 5 PM ET

# ZÁRUKA

AKÝKOL'VEK POKUS O SAMOSTATNÚ SLUŽBU A OPRAVU VÁŠHO ZARIADENIA, POKIAĽ IDE O INŠTRUKCIU ZÁKAZNÍCKOU SLUŽBOU HAIRMAX, ZABRÁNI VAŠEJ ZÁRUKE.

SPOLOČNOSŤ LEXINGTON INTERNATIONAL, LLC GARANTUJE HAIRMAX PROTI VADÁM V MATERIÁLOCH ALEBO PRACOVNOM LISTE NA 24 MESIACOV OD DÁTUMU KÚPY. AK TENTO VÝROBK MÁ ZÁVADU, LEXINGTON TO V PRÍPADE OBDOBIA ZÁRUKY OPRAVÍ ALEBO VYMENÍ, PODĽA JEJ MOŽNOSTI.

PO ZÁRUČNEJ DOBE JE UŽIVATEĽ POVINNÝ ZAPLATIŤ ZA VŠETKY DIELY A PRÁCU. AK JE PRODUKT OPRAVOVANÝ ALEBO VYMENENÝ, AŽ MIMO ZÁRUČNÉHO OBDOBIA, LEXINGTON SI VYHRADUJE PRÁVO POSKYTOVAŤ ROVNOSTŤNÉ ČASTI V RÔZNYCH FARBÁCH VÁŠHO PÔVODNÉHO VÝROBKU.

TÁTO ZÁRUKA NEZAHŔŇA ŠKODY SPÔSOBENÉ ŽIVELNÝMI POHROMAMI, NESPRÁVNÝM POUŽÍVANÍM, NEGLIGENCIOU, NEHODOU ALEBO ÚPRAVOU NEJAKEJ ČASTI VÝROBKU. TÁTO ZÁRUKA NEZAHŔŇA POŠKODENIE VPLYVOM NESPRÁVNEJ PREVÁDZKY ALEBO ÚDRŽBY, PRIPOJENIA K NESPRÁVNEMU NAPÁJANIU NAPÄTIA ALEBO OPRAVOU KÝMKOL'VEK INÝM NEŽ LEXINGTON. TÁTO ZÁRUKA JE NEPLATNÁ, AK JE TEMPEROVANÝ VÝROBK.

NA ZÍSKANIE ZÁRUČNEJ SLUŽBY MUSÍTE VOLAŤ ZÁKAZNICKÚ SLUŽBU HAIRMAX, ABYSTE VYŽIADALI AUTORIZOVANÉ ČÍSLO. MUSÍTE UHRADIŤ NÁKLADY NA DOPRAVU, VO SVOJOM ORIGINÁLNO M OBALE ALEBO OBALE PODĽA ROVNAKÉHO STUPŇA OCHRANY, SPOLU S VÁŠM NÁZOVOM A ADRESOU, DO:

**Lexington International, LLC, 1040 Holland Drive, Boca Raton, FL 33487, USA**

OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI; ODŠKODNENIE: OKREM VÝSKYTNE UVEDENÉHO VÝŠE UVEDENÉHO, LEXINGTON INTERNATIONAL, LLC NESE ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIADNE ŠPECIÁLNE, NEPRIAME alebo NÁSLEDNÉ ŠKODY, KTORÉ SÚ PRIAMO ALEBO NEPRIAMO SÚVISIACE S POUŽÍVANÍM ALEBO NEMOŽNOSŤOU POUŽITIA, HAIRMAX, AJ AK JE SPOLOČNOSŤ LEXINGTON INTERNATIONAL, LLC, PORADENÁ O MOŽNOSTI TAKÝCHTO POŠKODENÍ, AK ZIŽDEJ V ZMLUVE, NEGLIGENCIÍ ALEBO INÝCH ÚNAVŇÝCH ČINNOSTIACH. NIEKTORE ŠTÁTY NEUMOŽŇUJÚ VYLÚČENIE ALEBO OBMEDZENIE NÁHODNÝCH ALEBO NÁSLEDNÝCH ŠKODÍ, TAKŽE SA VÁS VÝŠŠIE UVEDENÉ OBMEDZENIE ALEBO VYLÚČENIE NEMUSÍ VZŤAHOVAŤ.

ROZHODNÉ PRÁVO: POUŽÍVANIE VLASU HAIRMAX A VÝKLAD PODMIENOK TEJTO DOHODY SA MUSÍ RIADIŤ A VYSTAVOVAŤ. V SÚLADE SO ZÁKONMI ŠTÁTU FLORIDA PLATNÉ PRE DOHODY ROKOVANÉ, VYKONÁVANÉ A VYKONÁVANÉ V CELKU A JEDNOTE V RÁMCI ŠTÁTU FLORIDA. ZMLUVNÉ STRANY SÚHLASIA, ŽE ŠTÁT KONFLIKTOV PRÁVNÝCH PREDPISOV ŠTÁTU FLORIDY SA NA TÚTO DOHODU NEPLATÍ ALEBO NA ŽIADNU TRANSAKCIU VYKONANÚ TÚTO DOHODOU.

JURISDIKCIA A MIESTO: ZMLUVNÉ STRANY NEPREDVOLITEL'NE PREDKLADAJÚ A SOUHLAS S JEDINOU A VÝHRADNOU JURISDIKCIU A MIESTOM ŠTÁTOV NA FLORIDE VO VOĽNÝCH PLÁTOCH, FLORIDÁCH, USA A SPOLKOVÝCH SÚDOCH NA JUŽNÝCH OKOLOCH NEZVÝŠOVAŤ OBRANU FÓRA NEDOPORUČENÝCH.

AUTORIZOVANÝ ZÁSTUPCA V EURÓPE (IBA REGULAČNÉ VECI): EMERGO EUROPE, PRINSESSEGRACHT 20, 2514 AP HAAG, HOLANDSKO. TEL: +31 (0) 70 345-8570 FAX: +31 70 346-7299

Na potvrdenie platnosti záruky sa zaregistrujte online na stránke [www.hairmax.com/warranty](http://www.hairmax.com/warranty)



# HAIRMAX®

The science of hair growth.®

## Corporate Office – Customer Service – Warranty Repairs

Lexington Intl., LLC  
1040 Holland Drive  
Boca Raton, Florida 33487 USA

Direct line +1 561-417-0200

United States and Canada 1-866-527-3726

United Kingdom 0808-134-9868

Australia 1-800-937-358

Monday - Friday 9 AM - 5 PM ET

Authorized Representative in Europe (Regulatory Affairs Only):

EC	REP	<b>EMERGO EUROPE</b> Prinsessegracht 20 2514 AP The Hague The Netherlands
----	-----	--

Tel: +31 (0) 70 345-8570 Fax: +31 70 346-7299

Australian Sponsor: Emergo Australia

Level 20, Tower II Darling Park, 201 Sussex Street  
Sydney, NSW 2000 Australia

